



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT  
GÖTTINGEN

Fakultät für  
Physik 

## Bachelorarbeit

# Echtzeit-Spektroskopie der Multipuls-Dynamik in einem Ti:Sa-Femtosekunden-Oszillator

# Real-time spectroscopy of multipulse dynamics in a Ti:Sapph femtosecond oscillator

angefertigt von

**Felix Kurtz**

aus Bad Nauheim

am 4. Physikalischen Institut

**Bearbeitungszeit:** 23. Mai 2016 bis 29. August 2016

**Betreuer:** Dr. Georg Herink

**Erstgutachter:** Prof. Dr. Claus Ropers

**Zweitgutachter:** Prof. Dr. Stefan Mathias



## Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Spektren eines 80 MHz-Ti:Sa-Oszillators in Echtzeit gemessen. Dazu wird mit Hilfe einer dispersiven Faser spektrale Information in zeitliche Information übersetzt, die dann mit Hochgeschwindigkeitselektronik aufgezeichnet wird. Hiermit gelingt es uns, Multipuls-Dynamiken zu enthüllen, die sich bei bestimmten Justagen des Laserresonators einstellen. Vor allem Doppelpulse stehen hierbei im Fokus. Aus dem zugehörigen Spektrum lässt sich der Abstand sowie die relative Phase beider Pulse bestimmen. So werden unterschiedlichste Dynamiken beobachtet: Abstand und relative Phase oszillieren, die relative Phase wächst stufenweise an, die Pulse kollidieren kontinuierlich, wir beobachten aber auch Pulse mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, die annähernd unabhängig durch den Resonator propagieren. Darüber hinaus werden diskrete Werte für stabile Pulsabstände identifiziert. Die Messmethode bietet auch die Möglichkeit zur Beobachtung von transienten Vorgängen wie der Entstehung von Femtosekundenpuls-Paaren. Mit Simulationen können verschiedene experimentelle Beobachtungen nachvollzogen werden.

**Stichwörter:** Physik, Bachelorarbeit, Echtzeitspektroskopie, Optische Solitonen, Multipulse

## Abstract

In this paper the spectra of an 80 MHz Ti:sapph oscillator are measured in real-time. For that purpose, a dispersive fiber is used which maps spectral information to temporal information. The latter can be recorded with high-speed electronics. Hereby we can reveal multipulse dynamics which arise at certain adjustments of the laser cavity. Especially double pulses are spotlighted. Their spectrum contains information about the pulse spacing and relative phase. Various types of dynamics are observed: spacing and relative phase are oscillating, the relative phase increases stepwise, periodically colliding pulses and pulses with different velocities propagating almost independently through the cavity. Beyond, we notice discrete values for stable pulse spacings. The used measurement technique allows also observations of transient processes like the build-up of a femtosecond pulse pair. Some of the experimental observations are related to simulations.

**Keywords:** Physics, Bachelor thesis, real-time spectroscopy, optical solitons, multipulses



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundlagen</b>	<b>3</b>
2.1. Ultrakurzpuls-Laser . . . . .	3
2.1.1. Modelocking . . . . .	3
2.1.2. Dissipative Solitonen . . . . .	5
2.2. Dispersive Fourier-Transformation . . . . .	6
2.2.1. Spektrale Interferenz und Doppelpulse . . . . .	8
2.3. Simulation . . . . .	9
2.3.1. Pulsformende Gleichung . . . . .	9
2.3.2. Gaindynamik . . . . .	10
2.3.3. Experimentelle Parameter . . . . .	11
<b>3. Experimentelle Vorgehensweise</b>	<b>13</b>
3.1. Laserquelle Femtolasers Rainbow . . . . .	13
3.2. Detektions-Aufbau . . . . .	14
3.3. Kalibration der Dispersiven Fouriertransformation . . . . .	15
3.4. Charakterisierung der Photodioden . . . . .	16
3.4.1. Antwortverhalten auf das dispergierte Signal . . . . .	17
3.4.2. Antwortverhalten auf das undispergierte Signal . . . . .	18
3.4.3. Bandbreite der Photodiode . . . . .	19
<b>4. Ergebnisse</b>	<b>23</b>
4.1. Kartierung des Resonators . . . . .	23
4.2. Darstellung der Messdaten . . . . .	25
4.3. Doppelpulse Messreihe 1 . . . . .	27
4.3.1. Gebundene Pulse (hohe Pumpleistung) . . . . .	28
4.3.2. Kollidierende Pulse (mittlere Pumpleistung) . . . . .	30
4.3.3. Durchlaufende Pulse (niedrige Pumpleistung) . . . . .	33

## *Inhaltsverzeichnis*

4.4. Doppelpulse Messreihe 2 . . . . .	34
4.4.1. Stufenweise Phasenentwicklung gebundener Doppelpulse . . . . .	34
4.4.2. Dreifach-Pulse . . . . .	37
4.5. Startdynamiken . . . . .	39
4.5.1. Getrennte Starts zweier Pulse . . . . .	39
4.5.2. Annäherung zweier Pulse . . . . .	41
4.5.3. Aufspalten eines Pulses . . . . .	43
4.5.4. Transiente Doppelpulse . . . . .	44
4.6. Multipulse bei Q-Switch-Instabilitäten . . . . .	46
4.7. Simulation . . . . .	47
4.7.1. Linear anwachsende Phase . . . . .	48
4.7.2. Oszillatorisches Verhalten . . . . .	49
4.7.3. Fester Abstand und feste Phase . . . . .	51
<b>5. Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>53</b>
5.1. Begegnung von Pulsen im Kristall . . . . .	54
5.2. Ursprung der Doppelpulse . . . . .	55
<b>A. Femtolasers Rainbow CEP HP</b>	<b>57</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>59</b>

# 1. Einleitung

Femtosekundenlaser sind heutzutage aus der aktuellen Forschung nicht mehr wegzudenken. Auch ihre Anwendungsgebiete werden vom industriellen Präzessionsschneiden bis zu neuen Operationsmethoden im medizinischen Bereich immer vielfältiger, da Manipulationen lokal und mit geringsten Energiemengen durchgeführt werden können. Besonders modengekoppelte **Titan:Saphir-Laser** haben sich zu dem Standard im Labor entwickelt, weil sie die kürzesten Pulse bis herunter zu nur zwei optischen Zyklen ( $\sim 5 \text{ fs}$ ) emittieren können. Diese Laser werden vor allem dazu genutzt, ultrakurze Prozesse zu beobachten.

In dieser Arbeit steht jedoch der Laser an sich im Vordergrund. Solch ein Laser ist ein nichtlineares System, welches nicht nur auf dem Gleichgewicht von Verstärkung und Verlusten basiert wie ein Dauerstrich-Laser (cw-Laser), der nur eine Wellenlänge emittiert. Eine zweite Balance muss gefunden werden, da Femtosekundenpulse Fourierbedingt ein sehr breites Spektrum besitzen. Die verschiedenen Frequenzen des Pulses haben im Lasermedium dispersionsbedingt unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten, was dazu führen würde, dass der Puls zerläuft. Damit dies aber nicht geschieht und sich eine stabile Pulsform ausbildet, muss es zu einem Gleichgewicht zwischen Dispersion und einem nichtlinearen Effekt kommen, welcher jene kompensiert. Die sich ausbildende Pulsformen werden **Solitonen** genannt. Ein Titan:Saphir-Laser eignet sich also hervorragend, um deren Dynamik und Interaktionsmechanismen zu studieren.

Dazu müssen aber mehrere Solitonen durch den Laser-Resonator propagieren. Dieser Zustand wird typischerweise in der Entwicklung von Ultrakurzpulslasern vermieden, da die dabei entstehenden Pulse länger sind als der mögliche Einzelpuls. Durch eine höhere Pumpleistung sowie eine leichte Dejustage vom Einzelpulszustand lassen sich solche **Multipuls-Zustände** jedoch erzielen. Davon berichtete zuerst [Lai et al., 1997]. Wie auch in den meisten späteren Beobachtungen wurde dort jedoch über viele Laserumläufe gemittelt. Typische Ti:Sa-Oszillatoren haben nämlich eine Pulswiederholrate von etwa 80 MHz. Also werden auf einer Nanosekundenskala

## 1. Einleitung

mehrere Pulse emittiert. Der maximal mögliche Abstand zwischen zwei Pulsen, die im Laser umherlaufen, beträgt deshalb wenige Nanosekunden. Solche Abstände lassen sich mit schnellen Photodioden auflösen, stellt experimentell also keine Hürde dar. Interessant sind aber vor allem Abstände, die nur eine Größenordnung größer sind als die Pulsdauer, denn dann kommt es zu direkten Interaktionen zwischen den Pulsen. Für Femtosekundenpulse liegt der spannende Abstandsbereich also unter einer Pikosekunde. Dies ist direkt elektronisch nicht mehr aufzulösen. So muss der Pulsabstand entweder aus dem Spektrum bestimmt werden, denn dessen Fouriertransformation ist die Autokorrelation des Zeitsignals. Typische Spektrometer besitzen jedoch einen CCD-Sensor, auf den der Strahl zuvor spektral aufgespalten wird. Mit einem solchen Chip wird das Spektrum jedoch über einen Zeitraum von einigen 100 Mikrosekunden bis wenigen Millisekunden gemittelt. Dies entspricht mindestens 10 000 Pulsen eines Ti:Sa-Oszillators. Im anderen Fall wird die Autokorrelation direkt durch Überlagerung des Signals mit seiner verzögerten Kopie gemessen. Auch mit dieser Methode kann der Abstand der Pulse nicht in Echtzeit bestimmt werden. Mit Hilfe dieser beiden Techniken konnten aber schon eine Reihe interessanter Beobachtungen gemacht werden: So haben [Wang et al., 1997] und [Kitano und Kinoshita, 1998] diskrete Pulsabstände gemessen.

Dynamisches Verhalten, welches sich auf einer Mikrosekunden-Skala abspielt, konnte allerdings noch nicht beobachtet werden, während einige Simulationen auf oszillatorische Zustände, etc. hinweisen. Mit der hier genutzten Methode der *dispersiven Fouriertransformation* sowie Hochgeschwindigkeitselektronik bestehend aus schnellen Photodetektoren und den schnellsten, kommerziell erhältlichen AD-Wandlern ist es nun möglich, das Spektrum jedes Pulspaars aufzunehmen und daraus den Abstand sowie die Phase zwischen den beiden Pulsen zu bestimmen. Dazu wird die spektrale Information durch eine **dispersive Faser** in zeitliche Information übersetzt. Dieses Verfahren eröffnet ganz neue Einblicke in die Welt der Laserdynamik. So haben [Herink et al., 2016] mit dieser Technik die Entstehung eines Femtosekundenpulses aufnehmen können. In dieser Arbeit sollen mit ihr Multipulse untersucht werden. Aber auch andere transiente Dynamiken lassen sich erstmals beobachten.

# 2. Grundlagen

## 2.1. Ultrakurzpuls-Laser

### 2.1.1. Modelocking

Damit ein Laser Femtosekundenpulse erzeugen kann, müssen viele Longitudinal-Moden im Resonator in fester Phasenbeziehung zueinander stehen (vgl. Abb.2.1). Dieses *Modelocking* wird dadurch erreicht, dass hohe Intensitäten im Laser nichtlinear verstärkt werden. Im hier untersuchten System wird das durch den **Kerr-Effekt** erreicht, also den intensitätsabhängigen Teil des Brechungsindizes  $n$  [Agrawal, 2001, S.165]

$$n(I) = n_0 + n_2 \cdot I . \quad (2.1)$$

Typische Lasermedien wie Titan:Saphir besitzen einen nichtlinearen Brechungsindex von  $n_2 \sim 10^{-19} - 10^{-20} \text{ m}^2/\text{W}$ . Für einen messbaren Effekt muss der Puls somit intensiver als  $10^{15} \text{ W/m}^2$  sein. Da der Laserstrahl ein gaussförmiges Modenprofil hat, also exponentiell von der Strahlmitte in der Intensität abfällt, wirkt der Titan:Saphir-Kristall wie eine Linse. Die Strahlmitte hat nämlich den längsten optischen Weg, während die äußeren Bereiche schneller durch den Kristall propagieren.

Höhere Intensitäten führen zu einer stärkeren Fokussierung des Strahls in das Laser-Medium. Da dort der Pumpstrahl stark fokussiert wird, ist in dessen Fokus die Besetzungsinvolution höher und diese kann durch die stärkere Kerr-Fokussierung effizienter abgebaut werden. So wird dieser intensive Puls gegenüber dem cw-Signal bevorzugt. Dieses Verfahren wird **Soft aperture Kerr-lens modelocking** (Abb.2.2a) genannt, während beim *Hard aperture Kerr-lens modelocking* ein Schlitz oder ähnliches benötigt wird. Diese Apertur lässt den fokussierten, intensiven Strahl ohne Verlust passieren, während der cw-Anteil teilweise abgeschnitten wird und so höhere Verluste erfährt. Dies wird in Abbildung 2.2b schematisch dargestellt.

## 2. Grundlagen

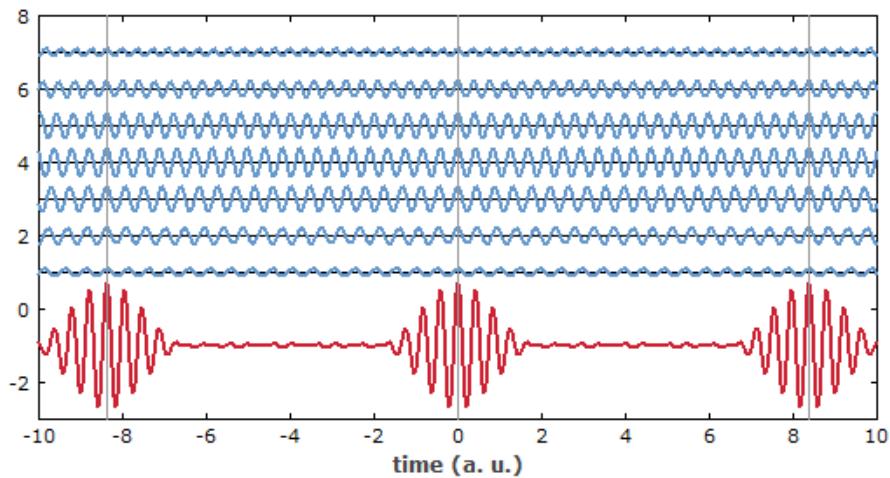


Abb. 2.1.: Modelocking<sup>1</sup>: Die feste Phasenbeziehung zwischen allen Longitudinalmoden im Resonator führt zu lokalisierten Pulsen.

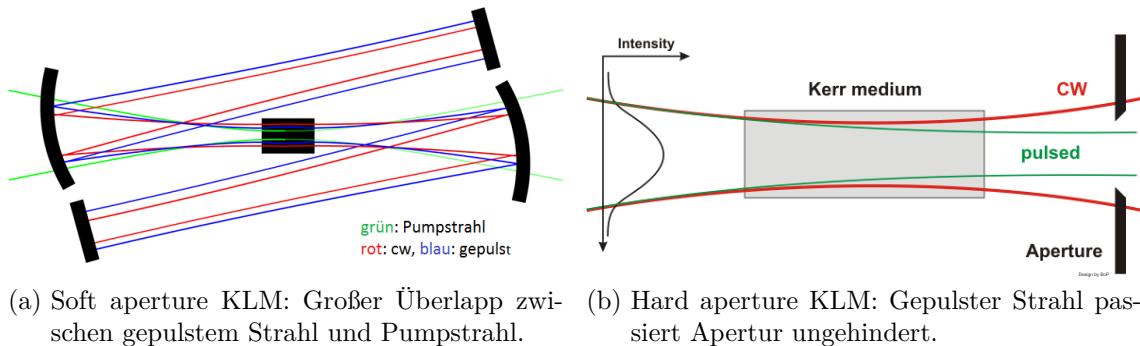


Abb. 2.2.: Die zwei Arten des Kerr-lens Modelocking<sup>2</sup>: In beiden Fällen erfährt das cw-Signal höhere Verluste als der modengekoppelte, intensivere Puls.

<sup>1</sup>[https://www.rp-photonics.com/img/pulse\\_train\\_synthesis2.png](https://www.rp-photonics.com/img/pulse_train_synthesis2.png), abgerufen am 21.08.2016

<sup>2</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr-lens\\_modelocking](https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr-lens_modelocking), abgerufen am 13.06.2016

## 2.1.2. Dissipative Solitonen

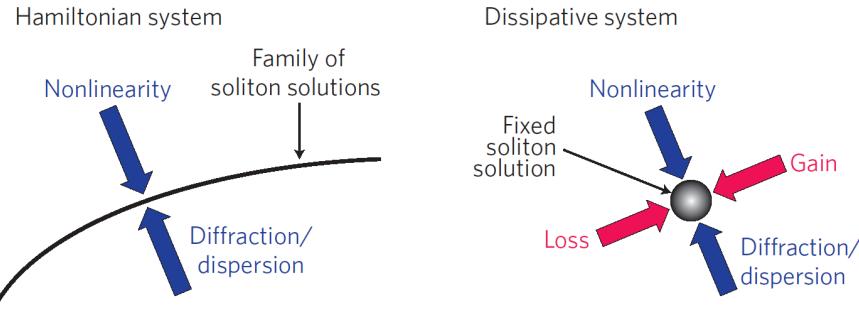


Abb. 2.3.: Dissipative Solitonen sind im Gleichgewicht zwischen Gewinnen und Verlusten sowie Dispersion und einer Nichtlinearität. Grafik aus [Grelu und Akhmediev, 2012] entnommen.

Ein *Soliton* ist ein lokalisiertes Wellenpaket, welches sich ähnlich wie ein Teilchen durch ein dispersives, nichtlineares Medium bewegt. Seine Form ändert sich also nicht, Dispersion und Nichtlinearität kompensieren sich. Dies determiniert auch die Pulsdauer. Außerdem ist die Propagationsgeschwindigkeit konstant. Bei einer Kollision zweier Solitonen gibt es keinen Energie- sowie Impulsaustausch. Sollte dies nicht der Fall sein, handelt es sich um eine *solitäre Welle*.

*Dissipative Solitonen* hingegen werden von einer weiteren Balance, nämlich zwischen Gewinnen und Verlusten, gehalten. Dies wird in Abbildung 2.3 illustriert. Während es also in einem Hamiltonschen System eine Familie an Soliton-Lösungen gibt, die sich nur hinsichtlich ihrer Energie unterscheiden, fixiert die zweite Balance in Dissipativen Systemen auch die Pulsenegie. Dies bedeutet, dass mit ihnen die Pulse in modengekoppelten Lasern [Grelu und Akhmediev, 2012] beschrieben werden können. Im Unterschied zu herkömmlichen Solitonen können diese auch stabile Multipulsformationen bilden [Ankiewicz und Akhmediev, 2008], sogenannte *Solitonen-Moleküle*.

## Faserlaser

In den letzten Jahren wurden bei der Entwicklung von Faserlasern große Fortschritte gemacht. Einige Arbeiten fokussierten sich dabei auch auf Solitonen-Moleküle in diesen Lasern. Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse kurz vorgestellt werden. In [Grelu und Akhmediev, 2004] konnte beispielsweise die Interaktion eines Einzelpulses mit einem Doppelpuls beobachtet werden. Durch Variieren der Aus-

## 2. Grundlagen

kopplung kann zwischen elastischer Kollision und dem inelastischen Fall, welcher zur Ausbildung eines stabilen Triplett-Zustandes führt, geschaltet werden.

In mehreren Messungen wurde entdeckt, dass die beobachteten Doppelpuls-Spektren nicht vollständig durchmoduliert sind. Verschiedene Erklärungsversuche basieren auf Simulationen. So diskutieren [Grapinet und Grelu, 2006] den Fall eines vibrierenden Pulspaares. Dessen Pulsabstand und relative Phase oszillieren auf einem Grenzzyklus, sodass die Mittelung über einen Zyklus zu einem weniger stark modulierten Spektrum führt. In [Zavyalov et al., 2009a] werden durch numerische Simulationen diskrete, äquidistante Pulsabstände gebundener Solitonen gefunden. Währenddessen wird in [Zavyalov et al., 2009b] von einer unabhängig anwachsenden Phase sowie flippenden Phase berichtet. Die Berücksichtigung der zeitabhängigen Verstärkungsdynamik in [Zavyalov et al., 2012] führt zur Abstandsstabilisation eines Triplets.

## 2.2. Dispersive Fourier-Transformation

Um das Spektrum jedes einzelnen Pulses vermessen zu können, wird die disperse Fourier-Transformation genutzt. Dazu wird die Gruppengeschwindigkeitsdispersion einer langen Glasfaser ausgenutzt, in die der Laserstrahl eingekoppelt wird. Da ihr Brechungsindex frequenzabhängig ist, benötigen die verschiedenen Frequenzen des Femtosekundenpulses unterschiedlich lange, um durch die Glasfaser zu propagieren. Ist  $\frac{dn}{d\lambda} < 0$ , wird dies als normale Dispersion bezeichnet. Für die im Experiment verwendete Glasfaser sowie den genutzten Wellenlängenbereich ist dies der Fall, d.h. niedrige Frequenzen haben einen geringeren Brechungsindex und propagieren schneller durch die Faser als die höherfrequenten Anteile. Die *Group Velocity Dispersion* (GVD), also die Ableitung der inversen Gruppengeschwindigkeit  $v_g$  bzw. die zweifache Ableitung der Kreiswellenzahl  $k$  nach der Kreisfrequenz  $\omega$ , führt zu einer linearen Beziehung zwischen der zeitlichen Verzögerung  $\Delta t$  nach der Faser und der Frequenz  $\nu$  [Agrawal, 2001, S. 9 ff.]:

$$\text{GVD} = \frac{\partial}{\partial \omega} \frac{1}{v_g} = \frac{\partial}{\partial \omega} \frac{\partial k}{\partial \omega} = \frac{\partial^2 k}{\partial \omega^2} \quad (2.2)$$

$$\Delta t = \text{GVD} \cdot s \cdot 2\pi \Delta \nu \quad (2.3)$$

Hierbei ist  $s$  die Länge der Glasfaser, welche so angepasst wird, dass das ausgehende Signal etwas kürzer als die Puls-Wiederholrate des Lasers ist. Dann kann das Spektrum am Ende der Faser mit einer schnellen Photodiode und einem schnellen

## 2.2. Dispersive Fourier-Transformation

Echtzeit-Oszilloskop vermessen werden [Goda und Jalali, 2013]. Da nur der Zeitunterschied zwischen zwei Frequenzen gemessen werden kann, muss dieser noch den richtigen Frequenzen zugeordnet werden. Dazu ist jedoch entweder die Kenntnis der Dispersion in der Glasfaser nötig oder die Kalibration geschieht mittels bekannter, stabiler Spektren. Im letzten Fall wird das Spektrum auch mit einem herkömmlichen, zeitlich mittelnden Gitter-Spektrometer gemessen und mit der Oszilloskop-Messung verglichen. Bei dieser konventionellen Messmethode wird der Strahl mit einem Gitter räumlich in seine spektralen Anteile zerlegt und diese dann mit einem CCD-Detektor aufgenommen. Da letzter relativ zur Pulswiederholrate nur langsam reagiert, wird somit über viele Pulse gemittelt und kann nur zur Kalibration genutzt werden. Der Vorteil der obigen Methode ist nämlich die Beobachtung von sehr kurzen und schnellen Prozessen, die sich nicht exakt wiederholen.

Eine zeitliche Verschiebung des Signals nach der dispersiven Faser kann zwei Ursachen haben: eine zeitliche oder eine spektrale Verschiebung. Deshalb wird mit einer zweiten Photodiode zusätzlich das undispergierte Zeitsignal aufgenommen, also die undispergierten Pulse. In Abbildung 2.4 wird der Unterschied zwischen beiden Kanälen deutlich.

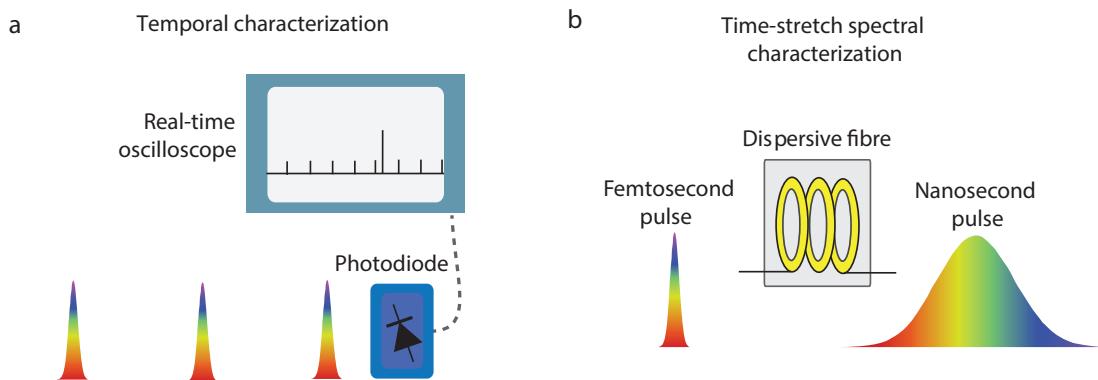


Abb. 2.4.: Skizze der dispersiven Fouriertransformation, aus [Herink et al., 2016] entnommen.

Für Fasern wird oft deren *Dispersionsparameter*  $D_\lambda$  angegeben, welcher über

$$D_\lambda = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \cdot \text{GVD} \quad (2.4)$$

mit der Group Velocity Dispersion verknüpft ist [Agrawal, 2001, S. 10 f.]. Für die im Experiment verwendete Faser ist  $D_\lambda(\lambda = 800 \text{ nm}) = -139.2 \frac{\text{ps}}{\text{nm km}}$ . Somit ist die GVD =  $47.3 \text{ ps}^2/\text{km}$ .

## 2. Grundlagen

### 2.2.1. Spektrale Interferenz und Doppelpulse

Das Spektrum zweier zueinander kohärenter Pulse mit einem bestimmten zeitlichen Abstand weist eine Modulation auf, die invers zum Abstand ist. Dies lässt sich damit erklären, dass bestimmte Wellenlängen in Phase, andere aber außer Phase sind. Die genaue Lage der konstruktiv interferierenden Wellenlängen bezüglich der Einhüllenden des Spektrums wird durch die relative Phase zwischen beiden Pulsen festgelegt. Die beiden Pulse interferieren also spektral. Mathematisch kann dies über folgende Eigenschaft begründet werden: Die Fouriertransformation des Spektrums ist die Autokorrelation des zeitlichen Signals. Da in der Autokorrelation zwei weitere Peaks beim positiven/negativen Pulsabstand auftreten, muss dieser invers im Spektrum kodiert sein. In Abbildung 2.5 wird der Zusammenhang zwischen zeitlichem Signal, zugehörigem Spektrum sowie Autokorrelation eines Pulspaars schematisch dargestellt.

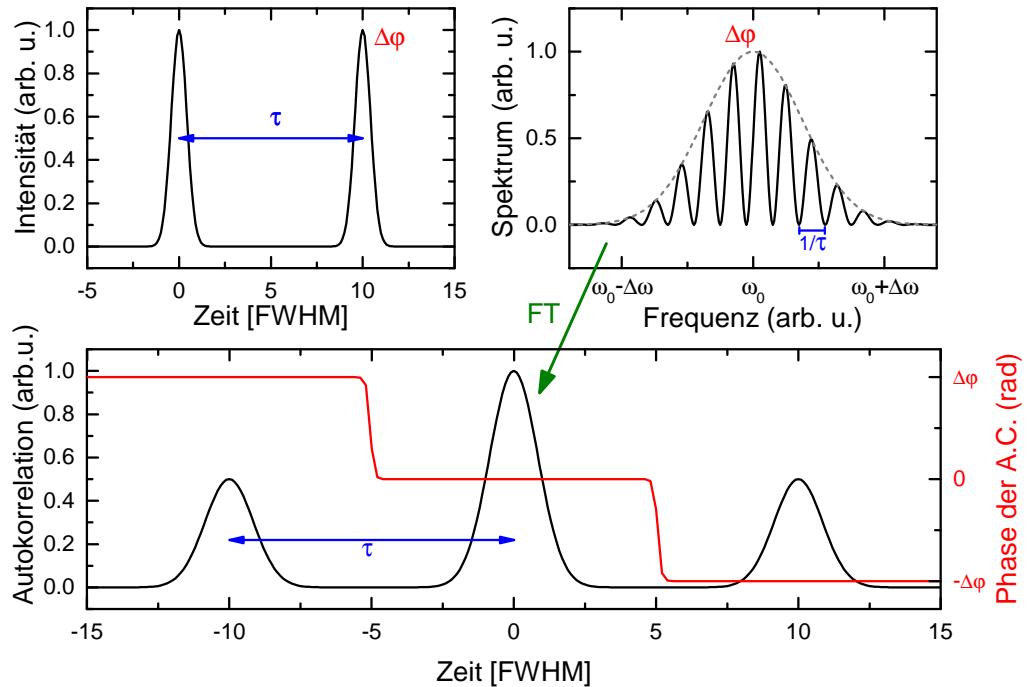


Abb. 2.5.: Beispielhafte Doppelpulse: zeitlicher Intensitätsverlauf, Spektrum und Autokorrelation.

## 2.3. Simulation

Die Effekte aller optischen Elemente auf das elektrische Feld im Laserresonator werden im Rahmen der Mastergleichung [Haus, 2000] mathematisch beschrieben. Dies resultiert in einer nichtlinearen partiellen Differentialgleichung vom Ginzburg-Landau-Typ. Das hier genutzte Modell wurde in [Kalashnikov et al., 2003] beschrieben, um Einzel- und Multipulsbetrieb zu simulieren und damit Aussagen zur Stabilität der Multipulse machen zu können. Im Rahmen dieser Arbeit wird es jedoch um eine explizitere Berücksichtigung der Gaindynamik auf der Zeitskala des Simulationsfensters erweitert.

### 2.3.1. Pulsformende Gleichung

Für die Zeitentwicklung werden zwei Zeitachsen genutzt: die Zeit  $t$  während eines Laserumlaufes sowie die Laserumlaufskoordinate  $z$ . Eine komplexe Funktion  $A(z, t)$  repräsentiert dabei die Einhüllende des Pulses bzw. der Pulse. Im Folgenden soll erläutert werden, welche Effekte auf die Pulsform  $A(z, t)$  wirken:

Neben linearer Verstärkung  $\alpha$  sowie Verlusten  $\rho$  (vor allem durch die Auskopplung) beeinflusst noch die Kerr-Linse die Pulsamplitude. Diese wird als schneller sättigbarer Absorber moduliert, d.h. höhere Intensitäten erfahren weniger Verluste. Mit zwei Parametern lässt sich das Verhalten dieses instantanen Absorbers kontrollieren: Die Modulationstiefe  $\gamma$  gibt den Verlust an, den ein kleines Eingangssignal erfahren würde, während sich die Verluste bei der Sättigungsintensität  $1/\sigma$  halbieren. Zugleich sorgt die Kerr-Linse für einen intensitätsabhängigen Phasenschub, die Selbstphasenmodulation  $\beta$  gibt die Stärke dieses Effekts an. Das Spektrum des Pulses wird auch durch das spektrale Verstärkungsprofil beeinflusst. Dabei wird angenommen, dass dieses Profil gaußförmig ist und eine Breite von  $1/t_f$  besitzt. Außerdem verursacht die Dispersion  $D$  einen frequenzabhängigen Phasenschub.

Fasst man alles zu einer Differential-Gleichung zusammen, ergibt sich

$$\frac{\partial A(z, t)}{\partial z} = \left[ \alpha - \rho - \frac{\gamma}{1 + \sigma|A(z, t)|^2} + (t_f^2 + iD)\frac{\partial^2}{\partial t^2} - i\beta|A(z, t)|^2 \right] A(z, t). \quad (2.5)$$

In der Simulation wird diese Gleichung numerisch per Split-Step-Verfahren gelöst. Zeitliche Manipulationen werden im Realraum durchgeführt, während Dispersion und spektrale Verstärkung im Fourierraum angewendet werden.

## 2. Grundlagen

### 2.3.2. Gain dynamik

Die lineare Verstärkung  $\alpha$  ist zeitabhängig, da sie proportional zur Besetzungsinversion im Laserkristall ist. Es gibt drei Terme, die diese ändern: Das Pumpen, der Abbau durch stimulierte sowie durch spontane Emission. Mit einem quasi 2-Level-System lässt sich dies modellieren:

$$\frac{d\alpha(t)}{dt} = \frac{I_p \sigma_a}{h\nu_a} (\alpha_{\max} - \alpha(t)) - \frac{\sigma_g |A(z, t)|^2}{h\nu} \alpha(t) - \frac{\alpha(t)}{T_r}, \quad (2.6)$$

wobei  $I_p$  die Pumpintensität,  $\sigma_a$  der Absorptionsquerschnitt bei der Pumpfrequenz  $\nu_a$  ist. Weiter ist  $\sigma_g$  der Verstärkungsquerschnitt bei der Laserfrequenz  $\nu$  und  $T_r$  die Lebensdauer des oberen Laserniveaus.

Ist das Pulspaar viel kürzer als die Resonatorlänge  $T_{\text{cav}}$  und die Änderung der Verstärkung  $\alpha$  während der Pulse vernachlässigbar, kann die obige Gleichung mit der Umlaufzeit  $T_{\text{cav}}$  multipliziert und anschließend integriert werden. Der Übersichtlichkeit halber werden neue Größen definiert. So gibt  $P = (I_p \sigma_a / h\nu_a) T_{\text{cav}}$  die Pumpstärke an,  $E_s = h\nu / \sigma_g$  korrespondiert zur Sättigungsenergie des Kristalls und  $E = \int_0^{T_{\text{cav}}} dt |A(z, t)|^2$  zur Gesamtenergie pro Laserumlauf. So kann die Verstärkung iterativ, also immer für den folgenden Laserumlauf, berechnet werden:

$$\begin{aligned} \alpha(z) &= \alpha(z-1) \exp \left( -\frac{E}{E_s} - \frac{T_{\text{cav}}}{T_r} - P \right) \\ &+ \frac{\alpha_{\max} P}{\frac{E}{E_s} + \frac{T_{\text{cav}}}{T_r} + P} \left[ 1 - \exp \left( -\frac{E}{E_s} - \frac{T_{\text{cav}}}{T_r} - P \right) \right]. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Für den stationären Fall ergibt sich somit eine Verstärkung von

$$\alpha_{\text{stat}} = \frac{\alpha_{\max} P}{\frac{E}{E_s} + \frac{T_{\text{cav}}}{T_r} + P}. \quad (2.8)$$

Der erste Puls eines Pulspaars baut jedoch die Besetzungsinversion zum mindest teilweise ab, während Pumpen und spontane Emission auf dieser Zeitskala vernachlässigbar sind. Die Berücksichtigung dieses Effekts stellt eine Erweiterung des Modells von [Kalashnikov et al., 2003] dar. In erster Näherung verringert stimulierte Emission den linearen Gain um einen Korrekturterm

$$\alpha_{\text{corr}}(z, t) = -\frac{\alpha(z)}{E_s} \int_{t_1}^t dt' |A(z, t')|^2. \quad (2.9)$$

So ändert sich der Gain auch während eines Roundtrips im Simulationsfenster:

$$\alpha(z, t) = \alpha(z) + \alpha_{\text{corr}}(z, t). \quad (2.10)$$

Dies hat zur Folge, dass der hintere Puls eines Pulspaars meistens etwas schwächer ist als der erste.

### 2.3.3. Experimentelle Parameter

Einige der zuvor beschriebenen Parameter sind Materialkonstanten für das Verstärkungsmedium Titan:Saphir. Diese werden in Tabelle 2.1 aufgeführt. Andere werden durch den Laserresonator determiniert (Tabelle 2.2). So verbleiben nur wenige Parameter, die experimentell kontrolliert werden können. Dazu zählt die Sättigungsintensität und die Modulationstiefe des sättigbaren Absorbers. Durch Justage des Lasers (Kristallposition sowie Spiegelpositionen) wird beides gleichzeitig geändert. Außerdem können sie nicht direkt abgelesen werden und es ist sehr schwierig, diese im Experiment zu kontrollieren. Dies bedeutet auch, dass beide Werte für die Simulation geschätzt bzw. getestet werden müssen. Als weiterer Parameter kann die Dispersion in gewissen Maßen geregelt werden. Der am besten zu kontrollierende Parameter ist jedoch die Pumpleistung.

In Abschnitt 4.7 werden drei verschiedene simulierte Dynamiken gezeigt. Dort wird deutlich, dass auch die Anfangsbedingungen bei der folgenden Entwicklung eine große Rolle spielen.

Größe	Wert
Zentralwellenlänge	$\lambda_0 = 800 \text{ nm}$
Brechungsindex @ $\lambda_0$	$n = 1.76$
Kerr-Index	$n_2 = 3 \cdot 10^{-20} \text{ m}^2/\text{W}$
Emissionsquerschnitt	$\sigma_g = 41 \text{ pm}^2$
Inverse spektrale Verstärkung	$t_f = 2.5 \text{ fs}$
Lebensdauer des oberen Niveaus	$T_r = 3.2 \text{ ps}$
Maximale Verstärkung	$\alpha_{\max} = 0.33$
Absorptionswellenlänge	$\lambda_a = 532 \text{ nm}$
Absorptionsquerschnitt	$\sigma_a = 20 \text{ pm}^2$

Tab. 2.1.: Eigenschaften eines Titan:Saphir-Kristalls.

## 2. Grundlagen

Größe	Wert
Kristalllänge	$x = 2 \text{ mm}$
Verluste	$\rho = 3.3\%$
Resonatorperiode	$T_{\text{cav}} = 12.8 \text{ ns}$
Pumpstrahlradius	$\omega_0 = 10 \mu\text{m}$
Pumpleistung	$P_{\text{Pump}} = 4.6 \text{ W} \text{ (typ.)}$

Tab. 2.2.: Eigenschaften des verwendeten Laseroszillators.

# 3. Experimentelle Vorgehensweise

## 3.1. Laserquelle Femtolasers Rainbow

Der zu untersuchende Laser ist ein Titan:Saphir-Laser (*Rainbow* von *FemtoLasers*). Er erzeugt 7-fs-Pulse bei einer Puls-Wiederholrate von 78 MHz und einer Leistung von mehr als 250 mW. Der Pump laser ist ein frequenzverdoppelter, diodengepumpter Nd:YVO-Laser (*Coherent Verdi V5*) mit bis zu 5 W Leistung. Der Ti:Sa-Kristall hat eine Länge von 2 mm, in den der Pumpstrahl durch eine Linse mit 4 cm Brennweite fokussiert wird. Um einen guten Kompromiss zwischen Stabilität und nichtlinearer Verstärkung im Pulsbetrieb zu erhalten [Stingl et al., 1995], ist der lange Arm etwa doppelt so lang wie der kurze. Außerdem werden gechirpte Spiegel verwendet, um die Dispersion durch den Kristall auszugleichen. Mit kleinen Prismen, sogenannten Wedges, wird die Netto-Dispersion feingetunt.

Der Laser läuft zunächst im cw-Betrieb. Um in den Puls-Betrieb zu gelangen, wird der Endspiegel mit einem dafür vorgesehenen Knopf schnell bewegt. Dadurch kommt es zu Intensitätsschwankungen, unter denen eine stark genug sein muss, um genügend Verstärkung zu erfahren und damit das Modelocking zu starten.

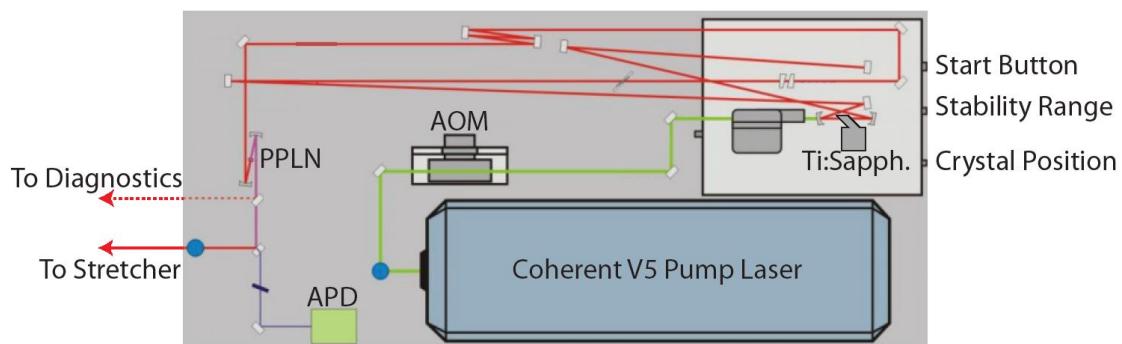


Abb. 3.1.: Aufbau des *Rainbow*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>aus Femtolasers, *Femtolaser Compact Pro CE Phase - Owners Manual v3.3*

### 3. Experimentelle Vorgehensweise

## 3.2. Detektions-Aufbau

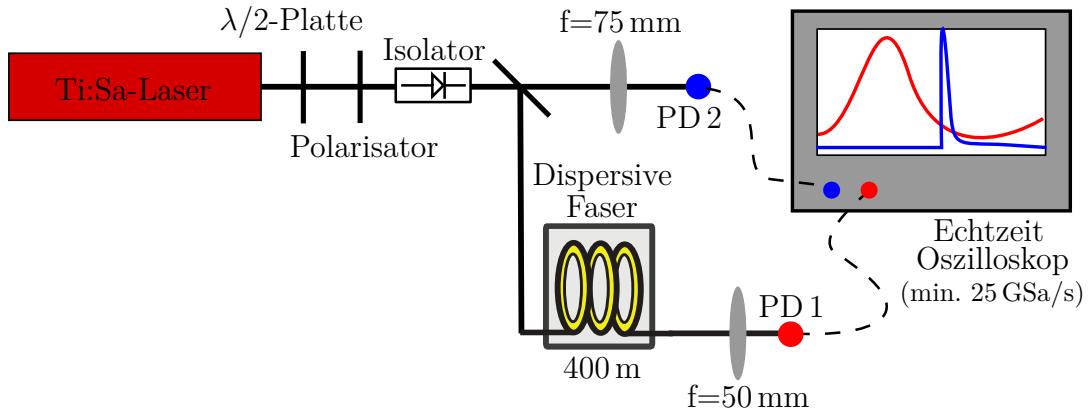


Abb. 3.2.: Setup Echtzeit-Spektroskopie: Der Laserstrahl wird mit einem Beamsplitter geteilt. Der eine Teil trifft direkt auf die Photodiode, der andere hingegen wird in einer dispersiven Faser auf Nanosekunden gestreckt und somit wird spektrale Information in zeitliche umgewandelt.

Der experimentelle Aufbau zur Echtzeit-Spektroskopie basiert auf wenigen Bau teilen, die in diesem Abschnitt erläutert werden sollen. Wie in Abb.3.2 zu sehen, wird der Laserstrahl zunächst mittels einer  $\lambda/2$ -Platte und einem Polarisator variabel abgeschwächt und senkrecht zur Tischemebene polarisiert. Danach passiert er einen optischen Isolator, welcher verhindert, dass Reflexionen an einer späteren Stelle bis in den Laser gelangen und dort zu unerwünschten Effekten bzw. Instabilitäten führen. Als nächstes wird der Strahl mit einem Beamsplitter aufgeteilt. Der transmittierte Anteil wird mit reflektiven ND-Filtern weiter abgeschwächt und mit einer Linse auf Photodiode Nr.2 fokussiert. Diese misst also den undispergierten Puls.

Der vom Beamsplitter reflektierte Strahl wird in die Glasfaser eingekoppelt. Um die Einkopplung zu erleichtern, läuft er zuvor noch über drei Spiegel, mit denen die Strahlposition und der Winkel eingestellt werden kann, mit dem der Strahl auf den Kollimator am Beginn der Glasfaser trifft. Außerdem passiert er zuvor noch einen BK7-Glasblock, in dem der Puls mittels Dispersion etwas gestreckt wird, damit es am Anfang der Glasfaser nicht aufgrund zu hoher Intensitäten zu unerwünschten nichtlinearen Effekten kommt. Am Ende der typischerweise 400 Meter langen Glasfaser wird der Strahl mit einem Kollimator parallel ausgekoppelt und mit einer Linse auf Photodiode Nr.1 fokussiert, die also das dispergierte Signal/Spektrum misst.

Beide Photodioden sind an das Oszilloskop (Tektronix DP71604C) angeschlossen.

### 3.3. Kalibration der Dispersiven Fouriertransformation

Dieses kann z.B. im 2-Kanal-Betrieb bis zu 4 ms mit einer Samplingrate von 25 GSa/s aufnehmen. Dies entspricht bei einer Pulswiederholrate des Lasers von 12.8 ns mehr als 300 000 Pulsen. Aber auch 50 GSa/s im 2-Kanal-Betrieb und 100 GSa/s mit nur einem Channel sind möglich.

Um diese Technik der dispersiven Fouriertransformation richtig nutzen zu können, müssen die wichtigsten Bauteile charakterisiert werden: die Glasfaser sowie die beiden Photodioden.

## 3.3. Kalibration der Dispersiven Fouriertransformation

Zunächst wird die Dispersion in der Glasfaser gemessen, da mit dem Oszilloskop nur Zeitverzögerungen gemessen werden können und nicht direkt Frequenzen. Dazu wird ein Etalon, hier ein Mikroskopie-Deckglas, und der Laser im stabilen Einzelpulsbetrieb genutzt. Aufgrund von Mehrfach-Reflexionen an der Vorder- sowie Rückseite interferieren bestimmte Frequenzen konstruktiv, andere destruktiv. Wie in Ref. [Lauterborn und Kurz, 2003, S.66] beschrieben, ergeben sich Frequenzabstände von  $\Delta\nu = \frac{c}{2Ln}$ , wobei  $c$  die Lichtgeschwindigkeit,  $n$  der Brechungsindex und  $L$  die Länge des Materials ist. Wird das Spektrum sowohl mit dem herkömmlichen Gitter-Spektrometer sowie mit dem Oszilloskop aufgenommen, kann den Frequenzen anhand des spektralen Interferenzmusters eine Verzögerung nach der Glasfaser zugeordnet werden (Abb.3.3). Trotz des breiten Spektrums ergibt sich im gesamten Messbereich ein etwa linearer Zusammenhang

$$\boxed{\frac{\Delta t}{\Delta\nu} = 0.1082(8) \text{ ns THz}^{-1}}$$

mit einer leichten Krümmung aufgrund von Dispersion höherer Ordnung. Der ermittelte Wert weicht etwa 10 % vom erwarteten Wert  $\Delta t/\Delta\nu = 0.119 \text{ ns THz}^{-1}$  ab, welcher sich mit einer Faserlänge von  $s = 400 \text{ m}$  und einer GVD von  $47.3 \text{ ps}^2/\text{km}$  aus Abschnitt 2.2 ergibt. Pro Laserumlauf, also 12.82 ns, können etwa 118 THz aufgenommen werden. So ist über die Fouriertransformation des Spektrums eine zeitliche Auflösung von 8.44 fs möglich.

### 3. Experimentelle Vorgehensweise

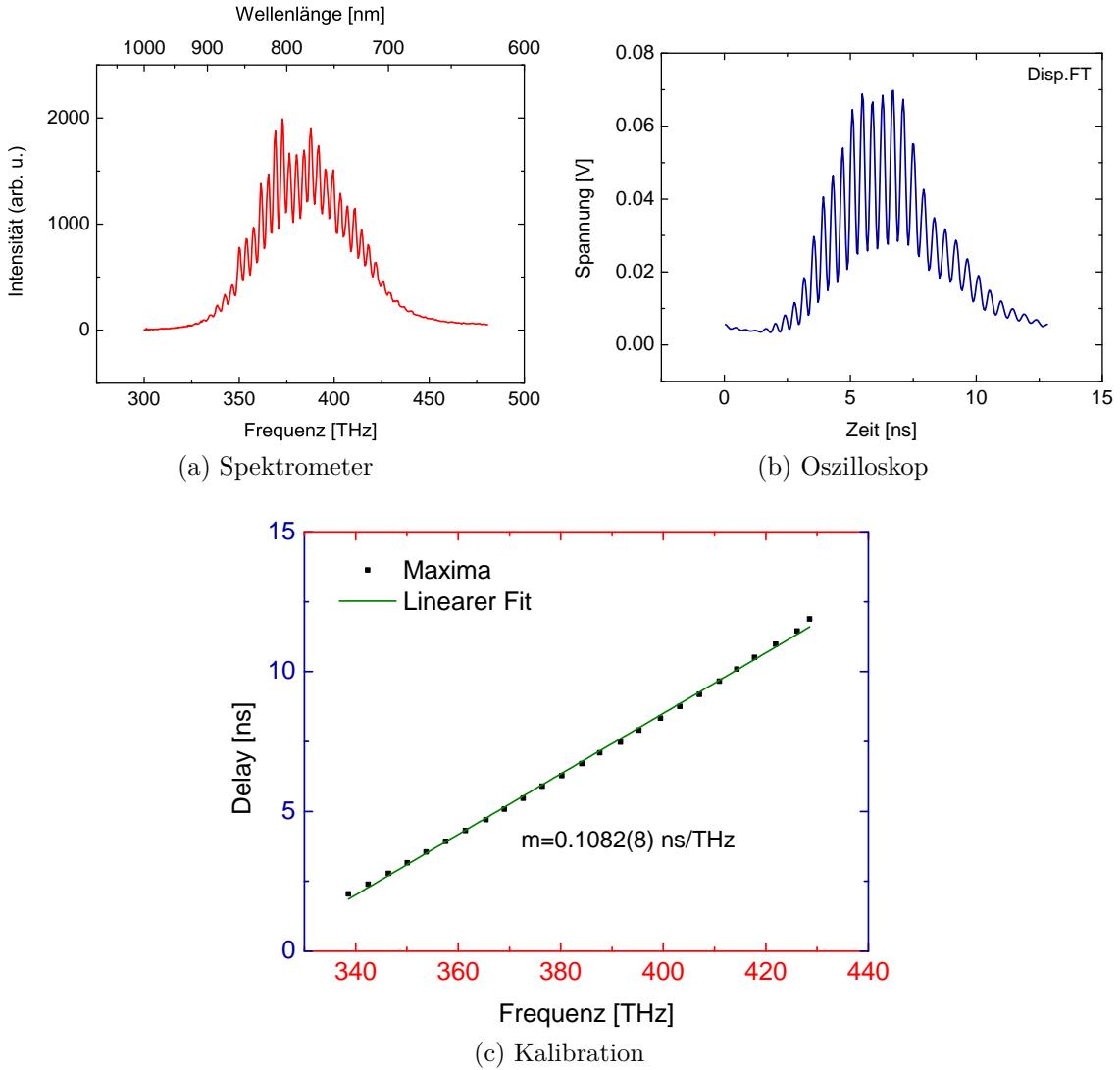


Abb. 3.3.: Kalibration durch ein Etalon: Verzögerung nach der Faser wird Frequenzen zugeordnet.

## 3.4. Charakterisierung der Photodioden

Als nächstes wird die Photodiode (Alphalas UPD-40-UVIR-P) charakterisiert. In Tabelle 3.1 finden sich die wichtigsten Herstellerangaben zu diesem ultraschnellen Photodetektor. Diese werden überprüft bzw. für die experimentelle Situation getestet. Die beiden verwendeten Photodioden werden anhand ihrer Seriennummern 04336 und 04346 unterschieden.

Zunächst wird getestet, in welchem Leistungsbereich die Photodioden linear reagieren, damit bei zukünftigen Messungen dieser Bereich nicht überschritten wird.

### 3.4. Charakterisierung der Photodioden

Dies geschieht für die beiden Messmodi mit undispergiertem sowie dispergiertem Signal. Außerdem wird die Bandbreite der Photodiode bestimmt, denn für die Beobachtung von bis zu 1 ps entfernten Pulsen ist es wichtig, dass die Photodiode schnell reagiert. Diese Pulse sind zu nah, um sie im zeitlichen Signal zu unterscheiden. So können sie nur als spektrale Interferenz detektiert werden. Um die Leistungsabhängigkeiten zu messen, wird der Laserstrahl mit der  $\lambda/2$ -Platte variabel abgeschwächt und mit einem Powermeter direkt vor der entsprechenden Photodiode gemessen.

PD. Spezifikation	Wert
Risetime	< 40 ps
Bandbreite	>8.5 GHz
Spektraler Bereich	350-1700 nm
Sensitivität @ 800 nm	0.12 A/W

Tab. 3.1.: Herstellerangaben zur Photodiode Alphalas UPD-40-UVIR.

#### 3.4.1. Antwortverhalten auf das dispergierte Signal

Hier treffen Nanosekundenpulse auf die Photodiode, die sich durch die Dispersion in der Faser aus Femtosekundenpulsen ergeben. Das Signal ähnelt also einem kontinuierlichen Signal. So wächst bis ca. 10 mW die Photodiodenantwort linear mit der eingestrahlten Leistung an. Danach wird die Photodiode übersteuert, sodass nicht genug Ladungsträger zwischen zwei Pulsen nachfließen können, wobei sich die Pulsform stark ändert. Im linearen Bereich kann allerdings die Sensitivität der Photodiode bestimmt werden. Diese gibt an, welcher Strom bei einer bestimmten eingesetzten Leistung von der Photodiode produziert wird. Um den geflossenen Strom zu erhalten, wird die am Oszilloskop anliegende Spannung durch den benutzen Widerstand von  $50\Omega$  geteilt. Außerdem wird der Strom noch über einen Roundtrip gemittelt, denn die eingestrahlte Leistung ist nur als Mittelung messbar. In Abb. 3.4a sind alle Messungen für beide Photodioden aufgetragen, beide liefern sehr ähnliche Sensitivitäten: 0.1154(8) A/W für 04336 und 0.1120(5) für 04346. Der kleine Unterschied kann auch durch eine leicht unterschiedliche Fokussierung bedingt sein. Insgesamt sind beide Werte aber in gutem Einklang mit der aus dem Datenblatt<sup>2</sup> entnommenen Sensitivitätskurve in Abb.3.4b

<sup>2</sup>[http://www.alphalas.com/images/stories/products/laser\\_diagnostic\\_tools/Ultrafast\\_Photodetectors\\_UPD\\_ALPHALAS.pdf](http://www.alphalas.com/images/stories/products/laser_diagnostic_tools/Ultrafast_Photodetectors_UPD_ALPHALAS.pdf), abgerufen am 08.02.2016

### 3. Experimentelle Vorgehensweise

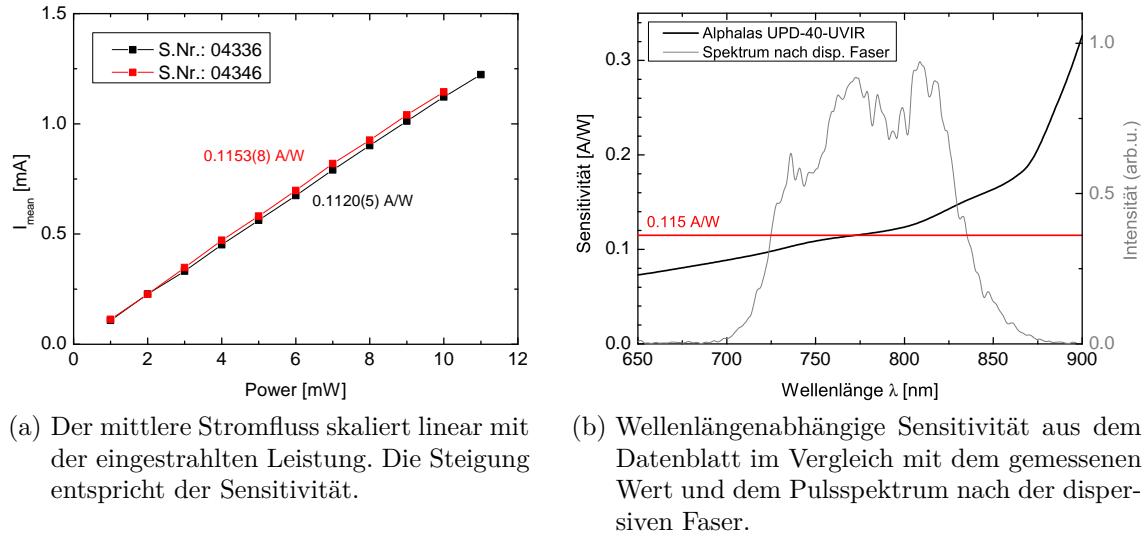


Abb. 3.4.: Sensitivität der Photodioden.

#### 3.4.2. Antwortverhalten auf das undispergierte Signal

In Abbildung 3.5a ist in Abhängigkeit der eingestrahlten Leistung die Photodiodenantwort auf das undispergierte Signal dargestellt. Hier ist das optische Eingangssignal viel kürzer als die Risetime der Photodiode. Erkennbar ist, dass die Peakamplitude bis ca. 2 mW linear ansteigt und in dieser Region die Pulslänge (FWHM) etwas über 100 ps liegt. Dies entspricht der angegebenen Risetime von 40 ps. Um also die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte die Photodiode in diesem Betriebsmodus nicht mit mehr als 2 mW bestrahlt werden. Je nach Justage ist ein Ringing nach dem Puls zu beobachten (vgl. Abb.3.5b).

Auffällig ist, dass die Halbwertsbreite sowie die Peakspannung für die Diode mit der Seriennummer 04346 schneller anwächst. Dies würde auf eine höhere Sensitivität hindeuten. Im obigen Abschnitt werden aber ähnliche Sensitivitäten für beide Photodioden gemessen. So ist der Unterschied wahrscheinlich auf ungleiche Bestrahlungsverhältnisse zurückzuführen. Dies wird auch durch den Unterschied in der Sättigungsspannung untermauert. Eventuell war bei Messung von 04336 die Linse vor der Photodiode nicht so positioniert, dass der Laserstrahl nur auf den sensitivsten Bereich der Photodiode trifft.

### 3.4. Charakterisierung der Photodioden

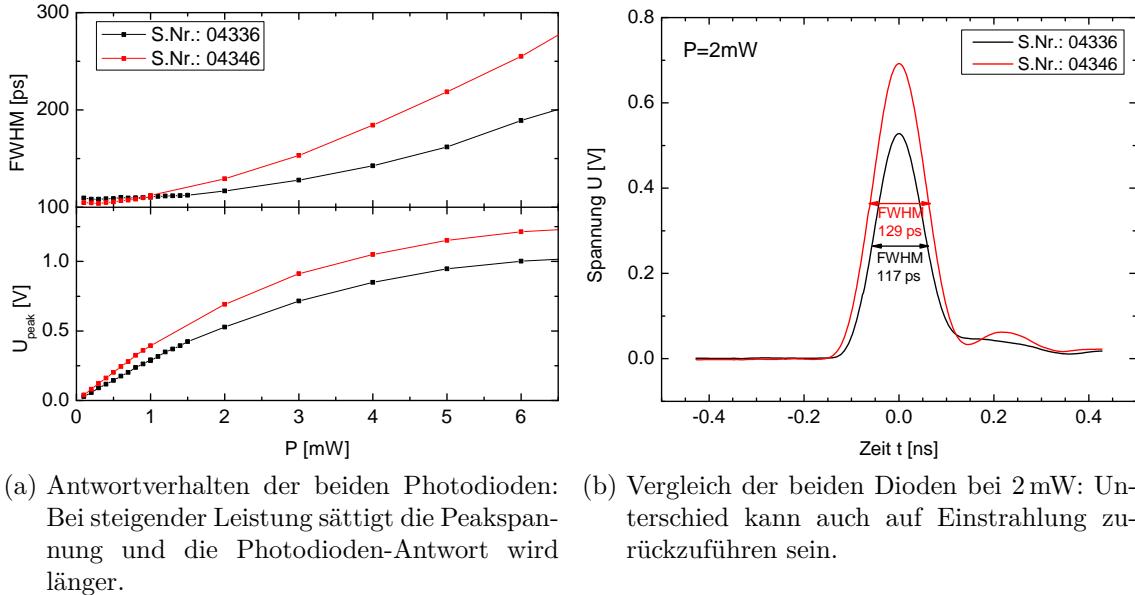


Abb. 3.5.: Photodiodenantwort auf undispergiertes Signal.


### 3.4.3. Bandbreite der Photodiode

Das Spektrum sollte voll durchmoduliert sein, wenn beide Pulse gleich stark sind. Die Photodiode wird jedoch ab einer bestimmten Modulationfrequenz, also einem bestimmten Abstand der Doppelpulse, nicht so schnell reagieren können. Daher reduziert sich die Modulationstiefe für hohe Frequenzen. Dadurch kann der Intensitätsunterschied der beiden Pulse überschätzt werden. Um dies zu untersuchen, wird ein Michelson-Interferometer in den Strahlengang eingebaut (vgl. Abb.3.8). Mit diesem können durch Variation einer Armlänge Pulspaare mit veränderlichem Abstand hergestellt werden. Diese Abstände finden sich in der Modulation des Spektrums wieder. Mit einem Powermeter wird außerdem verifiziert, dass beide Pulse die gleiche Energie haben.

In Abbildung 3.6 ist das disperse Signal sowie die zugehörige Fouriertransformation in Abhängigkeit der Armlängendifferenz dargestellt. Mit einer Differenz von etwa 400 µm, also einem Pulsabstand von ca. 1.33 ps, lassen sich Modulationen im dispergierten Signal erzielen, welche schneller als 10 GHz sind. Dies ist kompatibel zur Kalibration. In Abbildung 3.7 wird die Fouriertransformation ausgewertet. Dazu wird die Summe der beiden Nebenmaxima mit der des Hauptmaximums verglichen und gegen die Lage der Nebenmaxima, also der zugehörigen Frequenz, aufgetragen.

### 3. Experimentelle Vorgehensweise

Wie schon in der Fouriertransformation ist ein Unterschied zwischen negativen und positiven Armlängendifferenzen zu erkennen. Dies kann dem verwendeten Interferometer zugeschrieben werden und soll im folgenden Absatz erklärt werden.

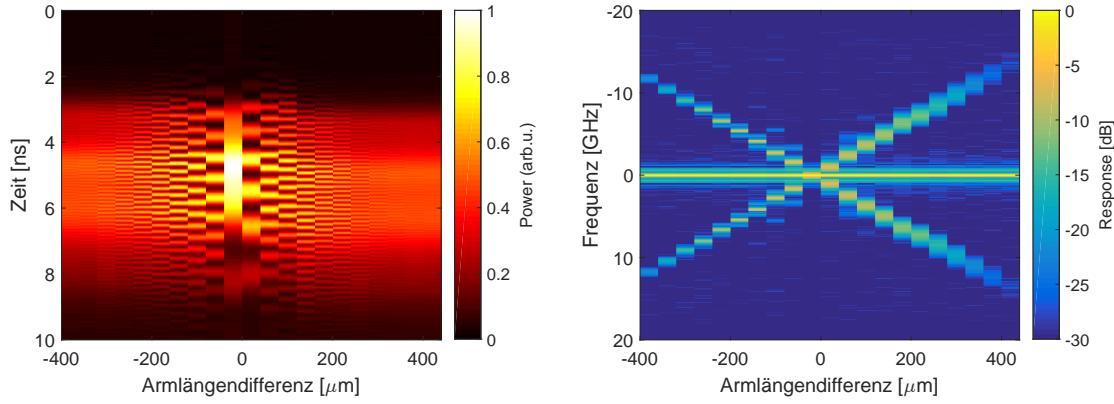

(a) Spektrum als Signal nach der Faser in Abhängigkeit der Armlängendifferenz.  
 (b) Fouriertransformierte von a) logarithmiert

Abb. 3.6.: Bandbreitenbestimmung der Photodiode durch ein Interferometer: Die Variation des Pulsabstandes ermöglicht verschiedene Modulationsfrequenzen des Signals nach der Faser (Doppelpulsspektren) und somit die Charakterisierung der Photodiode.

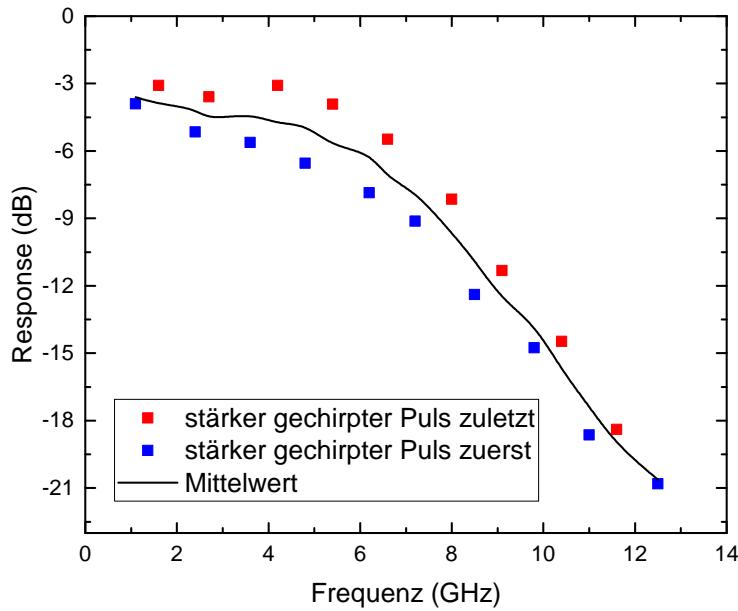


Abb. 3.7.: Relative Höhe der Nebenmaxima in Abhängigkeit der jeweiligen Modulationsfrequenz aus Abb.3.6b.

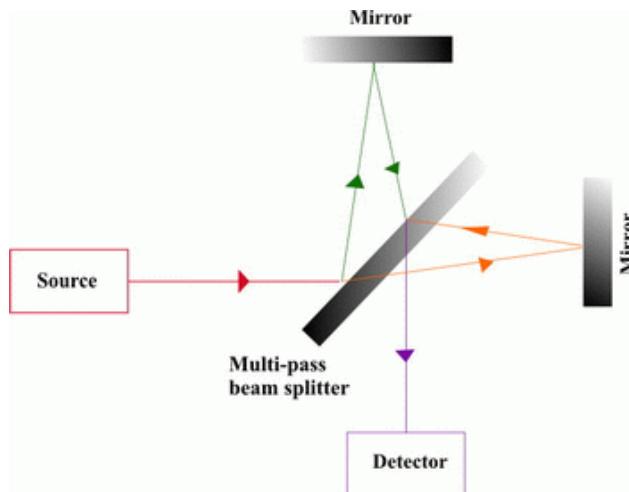


Abb. 3.8.: Schematische Zeichnung eines Michelson-Interferometers<sup>3</sup>: Bei beiden Armen wird der Strahl jeweils einmal reflektiert sowie einmal transmittiert, sodass die zwei Strahlengänge die gleiche Leistung aufweisen. Die Reflexion an der Vorderkante des Strahlteilers führt jedoch zu verschiedenen Propagationslängen im Glas des Strahlteilers und somit zu etwas höherer Dispersion im Arm des zuerst transmittierten Strahls.

Aufgrund der Funktionsweise des verwendeten Strahlteilers findet die Reflexion nur an der Vorderseite statt (vgl. Abb.3.8). Dies führt dazu, dass der zuerst reflektierte Strahl einmal, aber der zuerst transmittierte Strahl dreimal den Strahlteiler passiert. Dieser sorgt für einen positiven Chirp der Pulse, d.h. die niedrigen Frequenzen laufen den hohen Frequenzen voraus. Da der zuerst transmittierte Puls stärker gechirpt wird, ist der Pulsabstand hinter dem Interferometer frequenzabhängig: Ist der stärker gechirpte Puls vor dem anderen, dann haben die niedrigeren Frequenzen einen größeren Abstand als die höheren. Ist die Pulsreihenfolge umgekehrt, so haben die niedrigeren Frequenzen einen kleineren Abstand. Die resultierende Modulationsfrequenz im Spektrum ist also nicht konstant. Mit einer entsprechenden Kompressionsplatte in einem der beiden Arme kann dies verhindert werden. Dies ist hier aber nicht der Fall und führt in der Kalibrationsmessung zu einer Vorkompensation der leicht nicht-linearen Gruppengeschwindigkeitsdispersion (vgl. Abb.3.3c), sodass die Fouriertransformation für negative Verzögerungen schärfere erscheint – und für positive breiter.

Die Bestimmung der Bandbreite könnte man mit einem kontinuierlich modulierten Signal besser messen, benötigt dazu jedoch einen Modulator im 10 GHz-Bereich.

---

<sup>3</sup>[http://www.tydexoptics.com/images/products/multi\\_pass\\_beam\\_splitter.gif](http://www.tydexoptics.com/images/products/multi_pass_beam_splitter.gif),  
abgerufen am 14.08.2016



# 4. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird zunächst erläutert, wie der Resonator justiert sein muss, um Multipulse erzeugen zu können. Danach wird erklärt, wie die Messdaten verarbeitet werden, damit man aus ihnen Pulsabstände bestimmen kann. Mit diesem Vorwissen werden dann die beobachteten Multipulse dargestellt. Dabei wird sich hier auf Multipulse mit geringen Pulsabständen ( $< 1\text{ ps}$ ) beschränkt. Wie schon von [Lai et al., 1997] beschrieben, gibt es aber auch Multipulszustände mit langen (Nanosekunden) Abständen. Im Abschnitt 5.1 wird auf diese und deren Interaktionsmechanismus genauer eingegangen.

Zuerst werden zwei verschiedene Messreihen präsentiert, bei denen durch Variation der Pumpleistung bzw. durch verschiedene Startstörungen unterschiedlichste Multipuls-Zustände auftreten. Alle Messungen einer Messreihe wurden dabei bei gleicher Justage durchgeführt. Der nachfolgende Abschnitt 4.5 behandelt die zwei beobachteten Mechanismen, die zur Bildung eines gebundenen Multipulszustandes führen. Zuletzt werden die Ergebnisse der Simulation vorgestellt.

## 4.1. Kartierung des Resonators

Für das Einstellen von Multipulsen ist die Kenntnis der wichtigsten Resonatorparameter nötig. Dazu gehört die Kristallposition und der Abstand zwischen den beiden fokussierenden Spiegeln. Diese Abstände können aufgrund der Gegebenheiten momentan nur mit einer Genauigkeit von ca.  $20\text{ }\mu\text{m}$  gemessen werden.

In Abbildung 4.1 wird der Abstand der fokussierenden Spiegel bei verschiedenen Kristallpositionen variiert. In Abhängigkeit dessen wird mit einem Powermeter direkt am Laserausgang die cw-Leistung und – wenn möglich – auch die gemitelockte Leistung gemessen. Zu erkennen ist, dass die cw-Leistung geringer wird, wenn der Abstand zwischen den beiden Spiegeln verringert wird. Dies entspricht dem typischen Verlauf, den Laser zu justieren: Zuerst wird die cw-Leistung durch Justage der Resonator-Endspiegel bei weitem Abstand maximiert. Danach wird der

#### 4. Ergebnisse

Abstand der beiden Fokussierspiegel verringert, während der Endspiegel schnell bewegt wird, um Fluktuationen zu erzeugen, die bei geeigneter Stellung den modengekoppelten Betrieb erzeugen. Die Ausgangsleistung ist im modengekoppelten Betrieb größer als die cw-Leistung und nahezu unabhängig von der Stabilitätsposition. Somit nimmt der Leistungsunterschied zwischen den beiden Betriebsmodi zu größeren Stabilitätspositionen (kleineren Spiegelabständen) zu. Der modengekoppelte Puls wird unempfindlicher auf Störungen. Die Kristallposition beeinflusst auch die Leistung: Zum einen gibt es eine Position maximaler Leistung. Zum anderen ist zu erkennen, dass eine größere Kristallposition (kleinerer Abstand zwischen Kristall und fixem Fokussierspiegel) zu einer Aufspaltung des modelockbaren Bereiches führt.

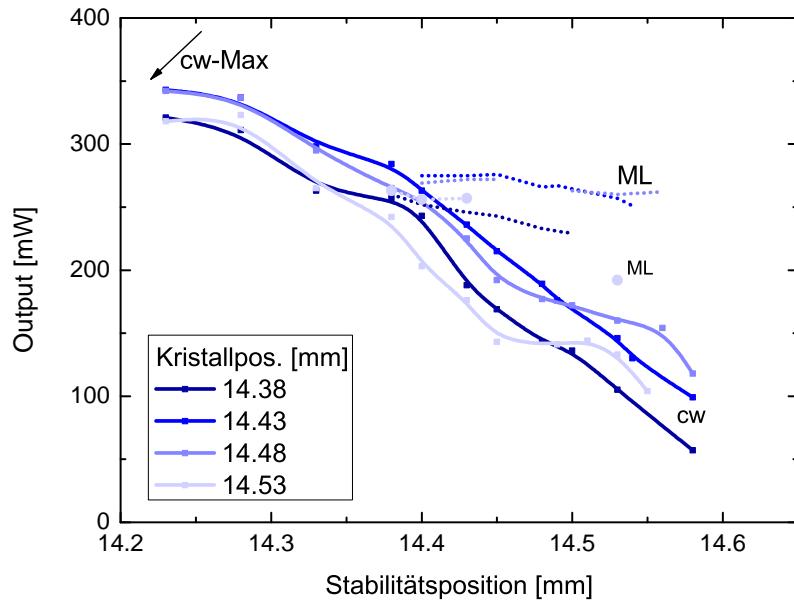


Abb. 4.1.: Abhängigkeit der Leistung (cw und modengekoppelt) von der Position des fokussierenden Spiegels (Stabilität) bei verschiedenen Kristallpositionen. Die Positionen werden von außen gemessen, d.h. dass größere Werte einer Verringerung des Abstandes zum festen Fokussierspiegel entsprechen.

Bei welchen Justagen lassen sich Multipulse erzeugen? In Abbildung 4.2 wird die Leistungsabhängigkeit von der Stabilitätsposition bei fester Kristallposition sowohl im cw-Betrieb als auch im Einzel-/Doppelpuls-Zustand dargestellt. Wieder ist das gleiche Verhalten für den cw-Fall (schwarz) zu erkennen. Die Einzelpuls-Leistung (rot) ist etwas größer, die Doppelpuls-Leistung (blau) noch größer. Zu beachten ist aber, dass die Leistung im Doppelpulsbetrieb nicht annähernd doppelt so groß ist wie die Einzelpuls-Leistung. Also sind die beiden Pulse des Paars jeweils nicht so energiereich (und möglicherweise nicht so kurz) wie der Puls im Einzelpulsbetrieb.

Vom Einzelpulsbetrieb ausgehend, können Doppelpulse durch Verringerung der Stabilitätsposition eingestellt werden. Meist befindet sich der Laser nach der ersten Störung durch Bewegen des Endspiegels im Einzelpuls-Zustand. Das Spektrum dieses Zustands ist aber mit einem hohen cw-Anteil behaftet. Die gesamte Ausgangsleistung ist also nicht in diesem Puls vereint. Wird der Laser durch Bewegen des Endspiegels ein zweites Mal gestört, können sich Doppelpulse einstellen.


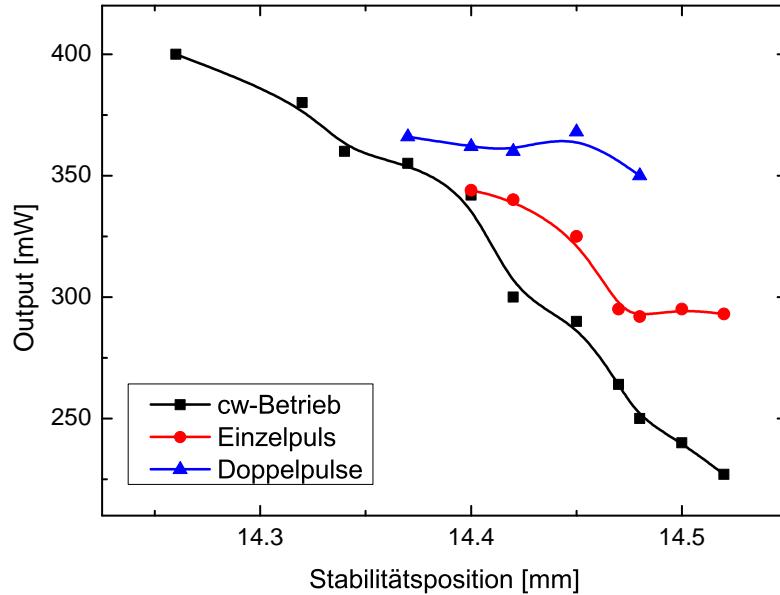


Abb. 4.2.: Abhängigkeit der Ausgangsleistung (cw und modengekoppelt) von der Position des fokussierenden Spiegels (Stabilität) bei fester Kristallposition. Etwas andere Justage als in Abbildung 4.1.


## 4.2. Darstellung der Messdaten

Die mit dem Oszilloskop gemessene Zeitreihe wird in Laserumläufe aufgetrennt. Modelockt der Laser, entspricht jeder Laserumlauf des dispergierten Signals dem Echtzeit-Spektrum (vgl. Abb. 4.3a). Es wird daher zunächst die Pulswiederholrate bestimmt. Dies geschieht über eine Fouriertransformation des gesamten Signals. Die Frequenz des höchsten Peaks entspricht der Wiederholrate, das Inverse also dem Pulsabstand  $t_{\text{rep}}$  bzw. der optischen Resonatorlänge des Lasers. Danach werden die Daten auf einem Gitter interpoliert, dessen eine Achse die Zeit bezüglich eines Laserumlaufs darstellt, während die andere die Umläufe zählt. Anschließend kann die Messung als 2D-Matrix dargestellt werden: Abbildung 4.3b und 4.3c. Nun sind Änderungen über viele Laserumläufe sichtbar.


#### 4. Ergebnisse

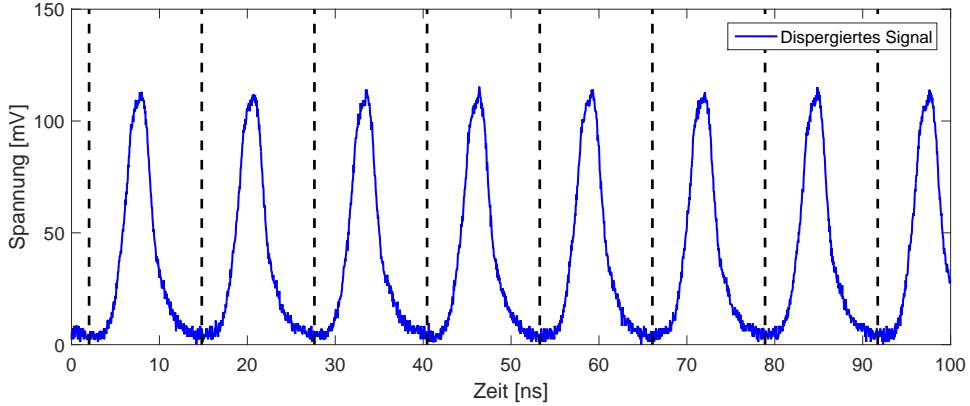


(a) Die gemessene Zeitreihe wird in Laserumläufe unterteilt. Diese können dann zu einer 2D-Matrix zusammengesetzt werden – wie in b) und c) geschehen.

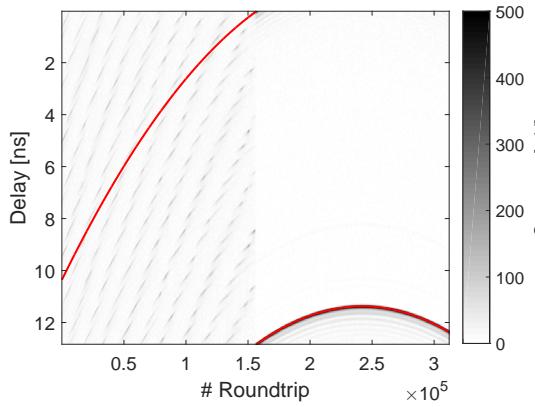


(b) Matrix des undispersierten Signals.

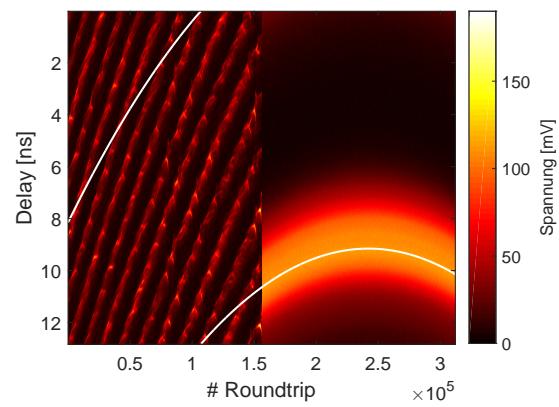

(c) Matrix des dispergierten Signals.

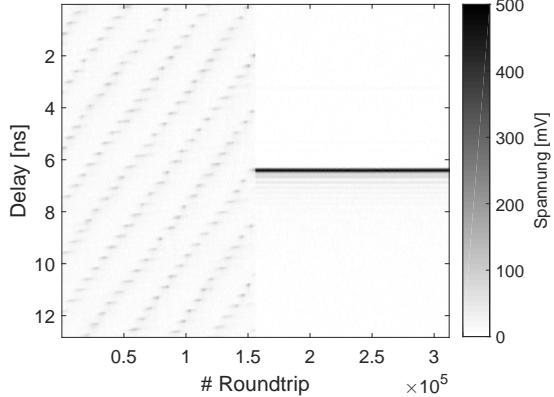

(d) Matrix des undispersierten Signals,  
Änderung der Repitionsrate korrigiert.

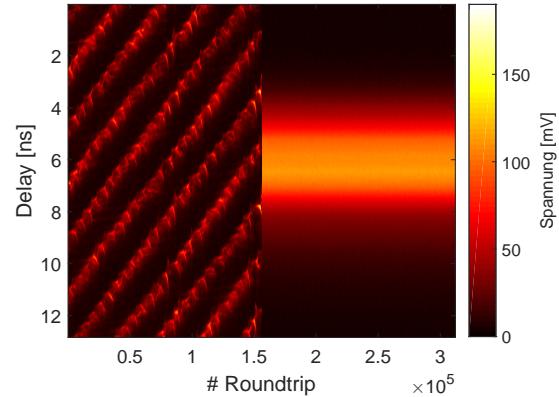

(e) Matrix des dispergierten Signals,  
Änderung der Repitionsrate korrigiert.

Abb. 4.3.: Darstellung der Messdaten: Die gemessene Zeitreihe wird in Laserumläufe aufgetrennt, dann wird die Auswirkung der Änderung der Resonatorlänge während der Messung korrigiert.

Da die Resonatorlänge während des Startvorgangs durch Bewegen eines Endspiegels geändert wird, ist die bestimmte Wiederholrate nur für einen kurzen Ausschnitt der Messung korrekt. Daher muss noch die Änderung der Repetitionsrate bzw. die Abweichung vom richtigen Wert korrigiert werden. Dazu wird ein Polynom durch die Peakpositionen des undispergierten, gemodelockten Signals gelegt. Der Definitionsbereichs des Polynoms wird auf die gesamte Messung ausgedehnt und dann wird jeder Roundtrip so verschoben, dass diese Peakpositionen zu gleichen Zeitpunkten im Roundtrip liegen. Mit diesem Polynom (evtl. mit anderem Offset) wird auch die dispergierte Messung verschoben. Das Resultat ist in Abbildung 4.3d sowie 4.3e dargestellt. Gut zu erkennen ist, dass der modengekoppelte Puls im undispergierten Fall nun immer zur gleichen Zeit bezüglich eines Laserumlaufs registriert wird.

### 4.3. Doppelpulse Messreihe 1

Wie zuvor beschrieben, wird der Laser bei geeigneter Justage durch zweimaliges Stören in den Doppelpuls-Betrieb überführt. Durch anschließendes Variieren der Pumpleistung lassen sich drei verschiedene Regime beobachten. Bei einer hohen Pumpleistung von  $P_{\text{Pump}} = 4.57 \dots 4.81 \text{ W}$  sind die Pulse gebunden. Es lässt sich eine interessante Phasen-Abstandsdynamik beobachten. Bei einer mittleren Pumpleistung von  $P_{\text{Pump}} = 4.48 \dots 4.57 \text{ W}$  kommt es zu wiederkehrenden Kollisionen zwischen den beiden Pulsen. Wird die Pumpleistung weiter auf  $P_{\text{Pump}} = 4.39 \dots 4.47 \text{ W}$  verringert, laufen die beiden Pulse mit etwas unterschiedlichen Repetitionsraten nahezu unabhängig durch den Resonator.

## 4. Ergebnisse

### 4.3.1. Gebundene Pulse (hohe Pumpleistung)

Die hier beobachteten Doppelpulse sind etwa 95 fs bis 115 fs voneinander getrennt, der Abstand der Pulse ändert sich also nur geringfügig. Es gibt jedoch ein oszillierendes Verhalten der Phase und des Abstandes.

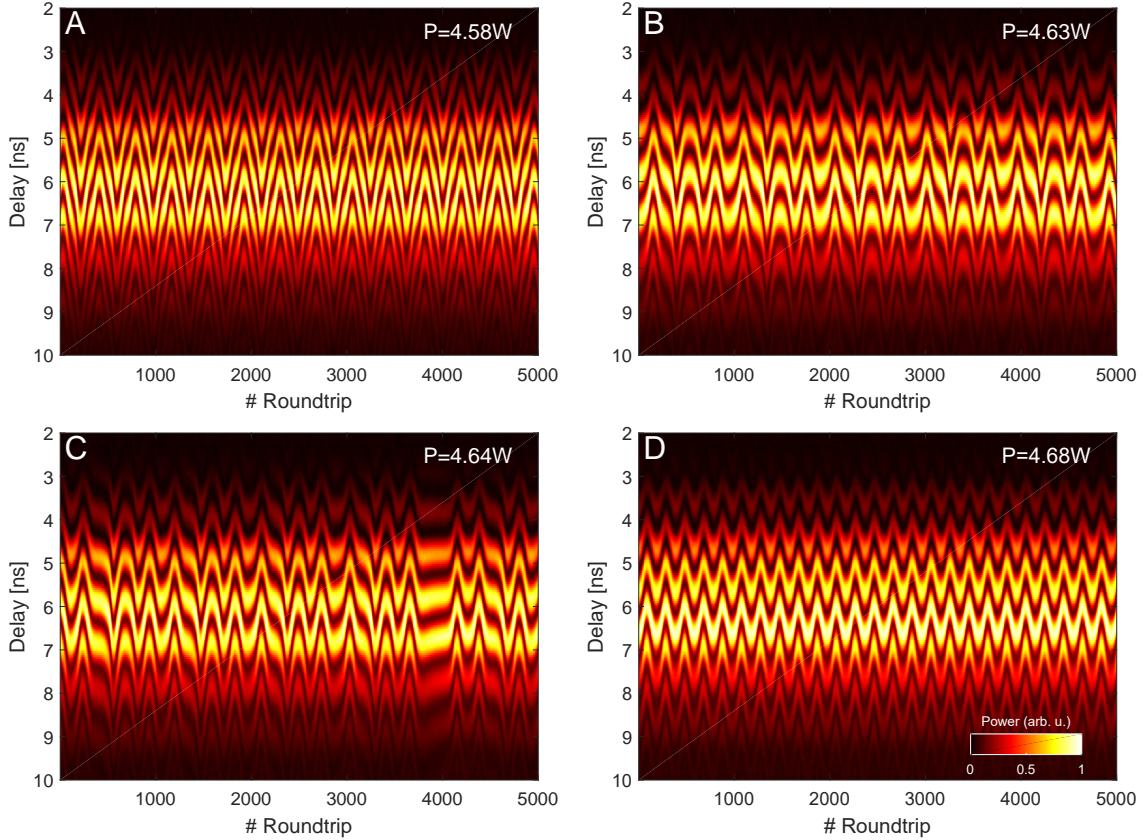


Abb. 4.4.: Gebundene Pulse: Zeitaufgelöste Spektren in Abhängigkeit der Pumpleistung. Relative Phase und Pulsabstand oszillieren.

Für drei der in Abbildung 4.4 gezeigten Messreihen wird das Verhalten exemplarisch diskutiert und die Dynamik in die *Interaction Plane* eingezeichnet, also als polarer Plot mit dem Abstand als Radius und der Phase als Winkel. In Abbildung 4.5 ist jedoch der Radius um 80 fs verringert, damit Abstandsänderungen besser zu erkennen sind. Die Pfeile zeigen an, in welche Richtung die Orbita durchlaufen werden. Für vergleichsweise niedrige sowie hohe Pumpleistungen ergibt sich ein Kreis-/Halbkreis-ähnliches Verhalten. Im ersten Fall oszilliert die relative Phase um etwa  $2\pi$ , während sich der Abstand zwischen 95 fs und 115 fs ändert. Für den Fall höherer Pumpleistung ist dies ähnlich: die Phase kehrt aber bereits nach einer Änderung um  $\pi$  um und die Abstandsänderung fällt geringer aus. Bei beiden Dynamiken fällt auf,

dass der Abstand bei einer positiven Änderung der Phase zunimmt, während er bei einer Abnahme abnimmt. Die der Pulsdynamik zugrunde liegende Gleichung (2.5) lässt darauf schließen, dass die Entwicklung der relativen Phase anzeigt, welcher Puls der stärkere ist. Je intensiver ein Puls ist, desto mehr Selbstphasenmodulation erfährt er. Somit wächst die absolute Phase schneller an. Ist der erste Puls stärker, sollte also die relative Phase abnehmen. Mit diesem Wissen lässt sich das oszillatorische Verhalten erklären: Der vordere Puls ist der intensivere, die Phase nimmt ab, aber auch der Abstand, da der hintere Puls schwächer und somit schneller ist als der vordere. Dieses Verhalten kehrt sich bei einem bestimmten Mindestabstand um. Nun ist der vordere der schwächere, die Phase und der Abstand nehmen zu, bis ein bestimmter Maximalabstand erreicht wird. Danach beginnt der Prozess erneut.

Dieser Zusammenhang zwischen der Änderung der Phase und des Abstandes ist auch für das komplexere Verhalten bei mittlerer Pumpleistung zu beobachten. Dort ergibt sich auch ein geschlossener Orbit. Dieser folgt teilweise den beiden anderen Dynamiken, besitzt jedoch 6 Umkehrpunkte. Außerdem nimmt die Phase langfristig ab, der hintere Puls ist also durchschnittlich schwächer als der vordere.

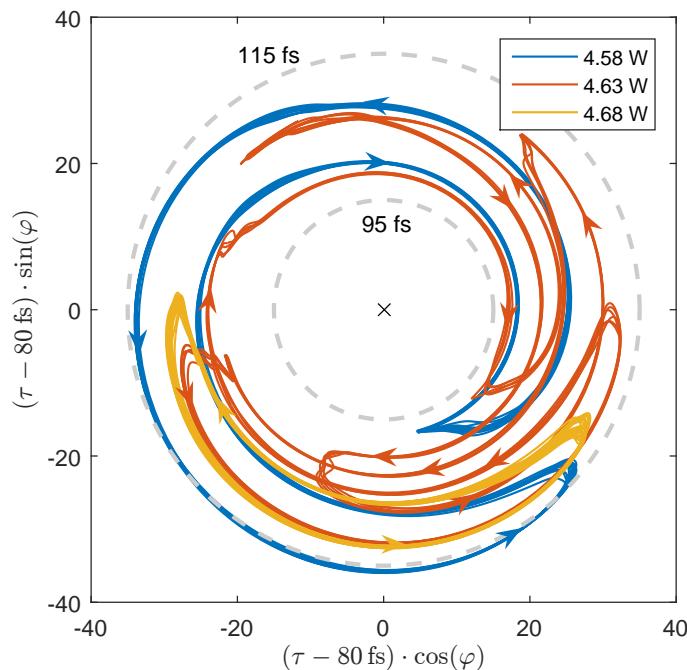


Abb. 4.5.: Gebundene Pulse: Phasendynamik in der Interaction Plane in Abhängigkeit der Pumpleistung. Während sich bei niedriger (blau) und hoher Pumpleistung (gelb) ein Kreis/Halbkreis-ähnliches Verhalten zeigt, ist die Dynamik bei einer mittleren Pumpleistung (rot) deutlich komplexer. Trotzdem ergibt sich ein geschlossener Orbit.

## 4. Ergebnisse

### 4.3.2. Kollidierende Pulse (mittlere Pumpleistung)

Dieser Zustand ist dadurch gekennzeichnet, dass es ständig zu Kollisionen zwischen den beiden Pulsen kommt, wie in Abbildung 4.6a gut zu erkennen ist. Diese entfernen sich danach schnell voneinander bevor der Abstand beider Pulse linear abnimmt und es schließlich zur erneuten Kollision kommt. Erklären lässt sich dies damit, dass sich nach der Kollision ein schwacher Puls vor dem starken ausbildet, dieser aufgrund des Kerr-Effektes schneller durch den Resonator läuft und somit der Abstand beider größer wird. Dann kommt es jedoch zu einem Anwachsen des vorderen Pulses und zu einer Schwächung des hinteren, weil dieser nur über die vom Vorderen reduzierte Besetzungsinvolution verfügt und so weniger Verstärkung erfährt. Es stellt sich ein festes Intensitätsverhältnis und somit auch eine konstante Relativgeschwindigkeit ein, mit der sich beide annähern, bis es zur nächsten Kollision kommt (vgl. Abb. 4.7, in welcher ein solcher Zyklus zu sehen ist). Somit lässt sich auch erklären, warum die Kollisionszeit  $T_{\text{interColl.}}$ , also die Zeit zwischen zwei Kollisionen, linear mit der maximalen Entfernung  $\tau_{\max}$  zusammenhängt (Abb. 4.8). Die Pulse entfernen sich meist mehr als 700 fs und benötigen meist mehr als 3000 Roundtrips, also etwa 40  $\mu$ s, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kollisionen. Diese Werte sind auch von der Pumpleistung abhängig. Da sich die Pulse bei geringen Pumpleistungen aber teilweise auch weiter als 1 ps voneinander entfernen, kann in diesen Fällen der maximale Abstand nicht mehr aufgelöst werden. Interessant wäre jedoch, ob sich auch bei anderen Pumpleistungen Häufungen des maximalen Abstandes wie in Abbildung 4.6b bei  $P_{\text{Pump}} = 4.56 \text{ W}$  ergeben.

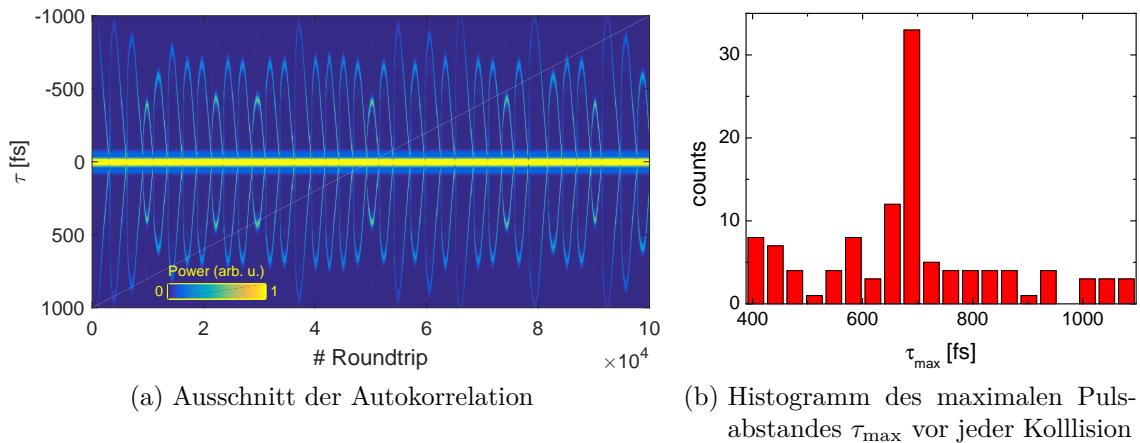


Abb. 4.6.: Kollidierende Pulse bei einer Pumpleistung von 4.56 W.

### 4.3. Doppelpulse Messreihe 1

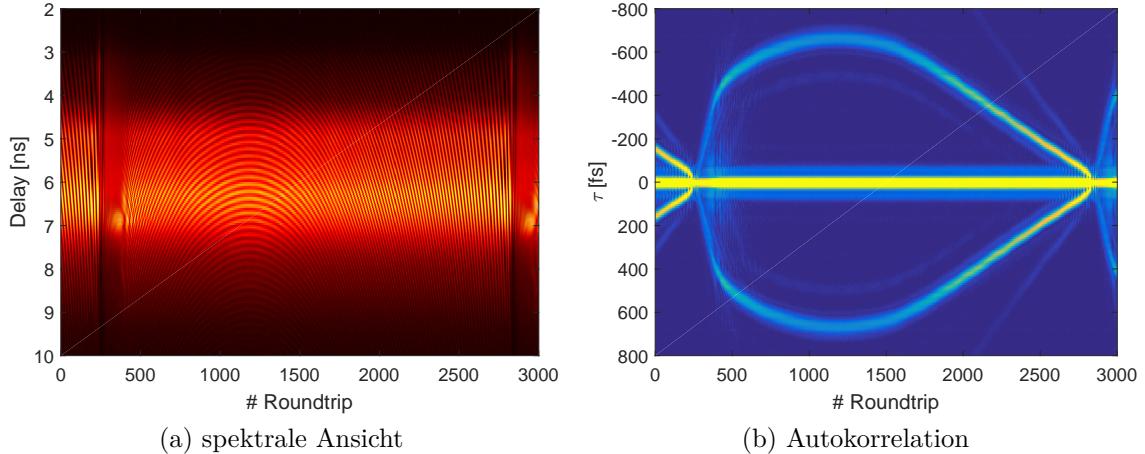


Abb. 4.7.: Kollisionszyklus bei einer Pumpleistung von  $P_{\text{Pump}} = 4.56 \text{ W}$ .

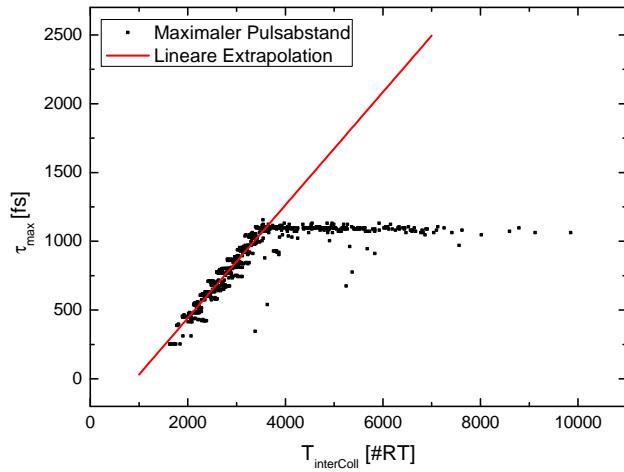


Abb. 4.8.: Maximaler Pulsabstand  $\tau_{\text{max}}$  versus Zeit zwischen zwei Kollisionen  $T_{\text{interColl}}$ . Das bestimmte  $\tau_{\text{max}}$  ist begrenzt durch die maximale Modulationsfrequenz des Spektrums.

Wenn die Pumpleistung auf 4.57 W erhöht wird, zeigt sich noch ein weiterer Interaktionsmechanismus: Die beiden Pulse stoßen sich voneinander ab, bevor sie überhaupt kollidieren. Diese Pumpleistung ist genau am Übergangsbereich zu den im vorigen Abschnitt beschriebenen gebundenen Doppelpulsen. In Abbildung 4.9 ist der Unterschied zu erkennen: Im Kollisionsfall entfernen sich die beiden Pulse wesentlich schneller und weiter. Außerdem ist eine klare Asymmetrie bezüglich des Kollisionszeitpunktes zu erkennen, während beim Abstoßungsprozess Annähern und Entfernen fast gleich ablaufen. In beiden Fällen ist beim Annähern eine Interaktion bzgl. der relativen Phase zu beobachten.

#### 4. Ergebnisse

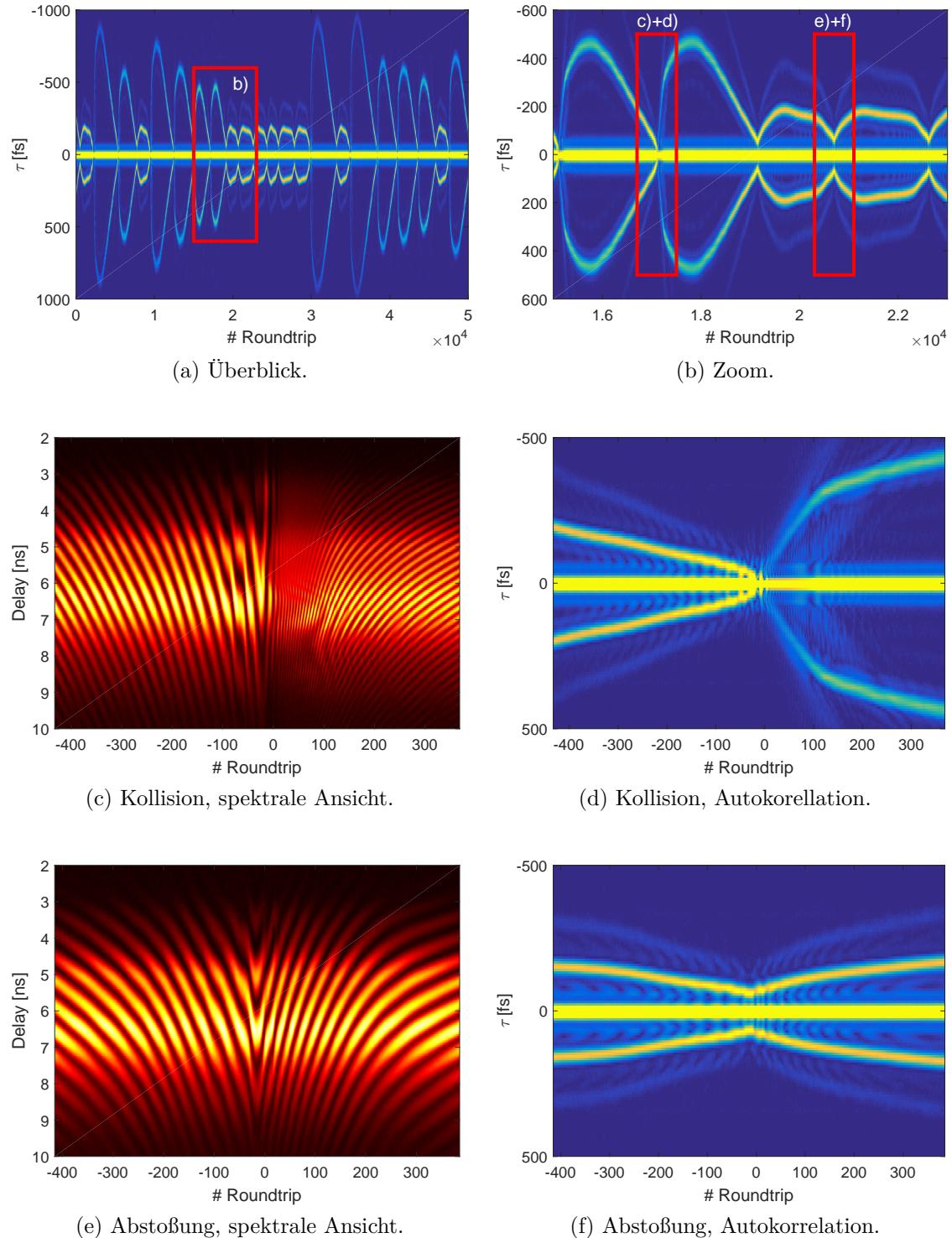


Abb. 4.9.:  $P_{\text{Pump}} = 4.57 \text{ W}$ : Unterschied zwischen Kollision und Abstoßung der beiden Pulse.

### 4.3.3. Durchlaufende Pulse (niedrige Pumpleistung)

In diesem Zustand ist die Pumpleistung so gering, dass zwar zwei Pulse durch den Laser laufen, diese aber einen großen Intensitätsunterschied haben, so dass sie unterschiedliche optische Weglängen haben und sich so auf einer 100 ms-Skala gegeneinander verschieben. In Abb. 4.10a ist eine *FastFrame*-Aufnahme dieses Betriebs zu sehen. Dabei wird auf den stärkeren Puls getriggert. Es wird im Gegensatz zu den anderen Aufnahmen nicht kontinuierlich gemessen, indem zu jedem Roundtrip das Spektrum und zeitliches Signal aufgenommen wird. Hier werden sehr viele Pulse übersprungen, damit ein langes Zeitintervall von 400 ms auch mit 25 GSa/s aufgenommen werden kann. Bei der abgebildeten Messreihe vergehen 5  $\mu$ s zwischen je zwei Triggerzeitpunkten. Die Relativgeschwindigkeit zwischen beiden Pulsen ist jedoch nur annähernd konstant. Dies lässt sich auch in der Peak-Spannung des undispergierten Signals erkennen, welche proportional zur Pulsennergie ist (vgl. Abb. 4.10b). So wird der schwache Puls die meiste Zeit schwächer, während der starke stärker wird. Dies führt zu einer Zunahme der Relativgeschwindigkeit. Es gibt jedoch zwei Zeitpunkte zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kollisionen, bei denen sich dieses Verhalten genau umgekehrt: Es findet ein Energietransfer vom stärkeren zum schwächeren Puls statt und die Relativgeschwindigkeit nimmt ab. Dies lässt sich damit erklären, dass die beiden Pulse sich gerade dann im Laserkristall begegnen und so der schwächere Puls vom Kerr-Effekt des stärkeren profitiert.

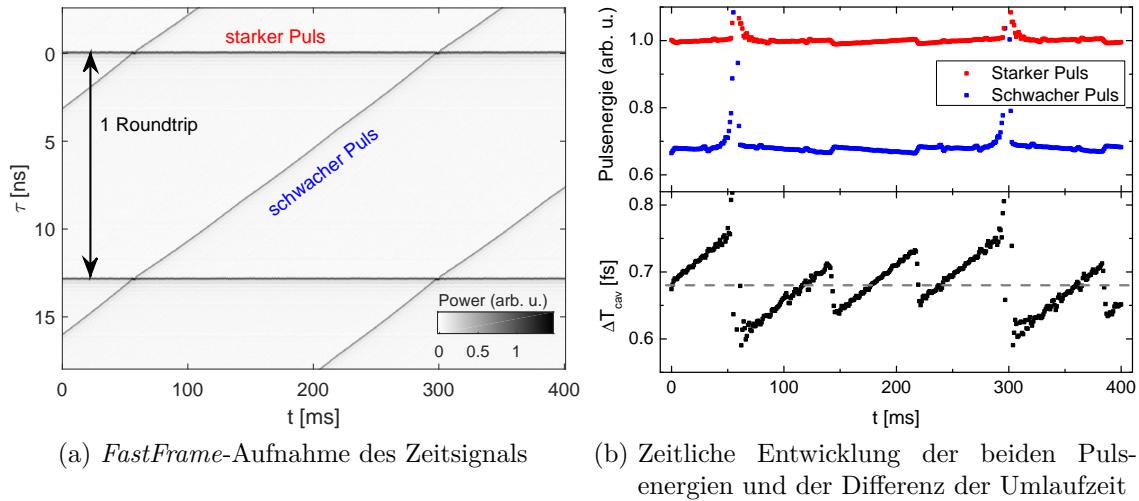


Abb. 4.10.: Zwei unterschiedlich starke Pulse im Laser, die aufgrund des Kerr-Effekts verschiedene optische Weglängen haben und sich so gegeneinander verschieben.

## 4.4. Doppelpulse Messreihe 2

Bei dieser Messreihe ist der Laser etwas besser justiert als zuvor, sodass die Ausgangsleistung höher ist und somit sogar Dreifachpulse möglich sind. Durch Störung des Einzelpuls-Betriebs und anschließendes Variieren der Pumpleistung lassen sich wieder verschiedene Multipulsdynamiken finden. Unter anderem wird bei einer deutlich geringeren Pumpleistung das in Abschnitt 4.3.1 beschriebene oszillatorische Verhalten der Phase und des Abstandes gebundener Doppelpulse bei einem Abstand von 100 fs beobachtet. In diesem Abschnitt wird jedoch das Verhalten von 170 fs entfernten Doppelpulsen gezeigt. Darüber hinaus stehen Triplets im Fokus.

### 4.4.1. Stufenweise Phasenentwicklung gebundener Doppelpulse

Hier beginnt die Messreihe mit Doppelpulsen, deren Phase und relativer Abstand fest sind (Abb. 4.11 A+B). Der Abstand liegt etwa bei 170 fs. Dann wird die Pumpleistung verringert. Dabei wird beobachtet, dass der Abstand der beiden Pulse immer noch sehr konstant ist, während die Phase jedoch beginnt, in  $2\pi$ -Sprüngen durchzulaufen (vgl. Abb. 4.11 C-F). Verringert sich die Pumpleistung weiter, geschieht dieser Prozess schneller, bis die Phase annähernd linear anwächst (vgl. Abb. 4.11 G+H). Je geringer die Pumpleistung ist, desto schneller das Wachstum. Um dies zu verdeutlichen, ist in Abbildung 4.12 in Abhängigkeit der Pumpleistung die Anzahl der Roundtrips aufgetragen, innerhalb deren sich die Phase um  $2\pi$  ändert. Wird die Entwicklung der Phase wie in Abbildung 4.13 mit dieser Zeit skaliert, lässt sich der Übergang von einer nahezu stufenförmigen Entwicklung zum linearen Drift der Phase durch Verringerung der Pumpleistung noch besser beobachten.

Für dieses Verhalten lässt sich eine mögliche Erklärung finden: Ist die Pumpleistung gering, ist der Intensitätsunterschied zwischen beiden Pulsen konstant. Der hintere erfährt weniger Verstärkung und ist deshalb schwächer. Die Phase ändert sich linear. Für hohe Pumpleistungen hingegen kann es zu einer Kopplung der Phasen (Locken) kommen (siehe Abb. 4.11 A,B). Bei einer leicht geringeren Pumpleistung driftet die Phase langsam von der gelockten Position weg. Ist der Unterschied zu groß, beschleunigt sich die Änderung der Phase bis diese sich wieder in der Nähe der gelockten Position befindet. Der Intensitätsunterschied nimmt also kurzzeitig stark zu bis sich wieder ein annähernd stabiler Zustand eingestellt hat. Je geringer die Pumpleistung, desto größer der Intensitätsunterschied und instabiler dieser Zustand.

#### 4.4. Doppelpulse Messreihe 2

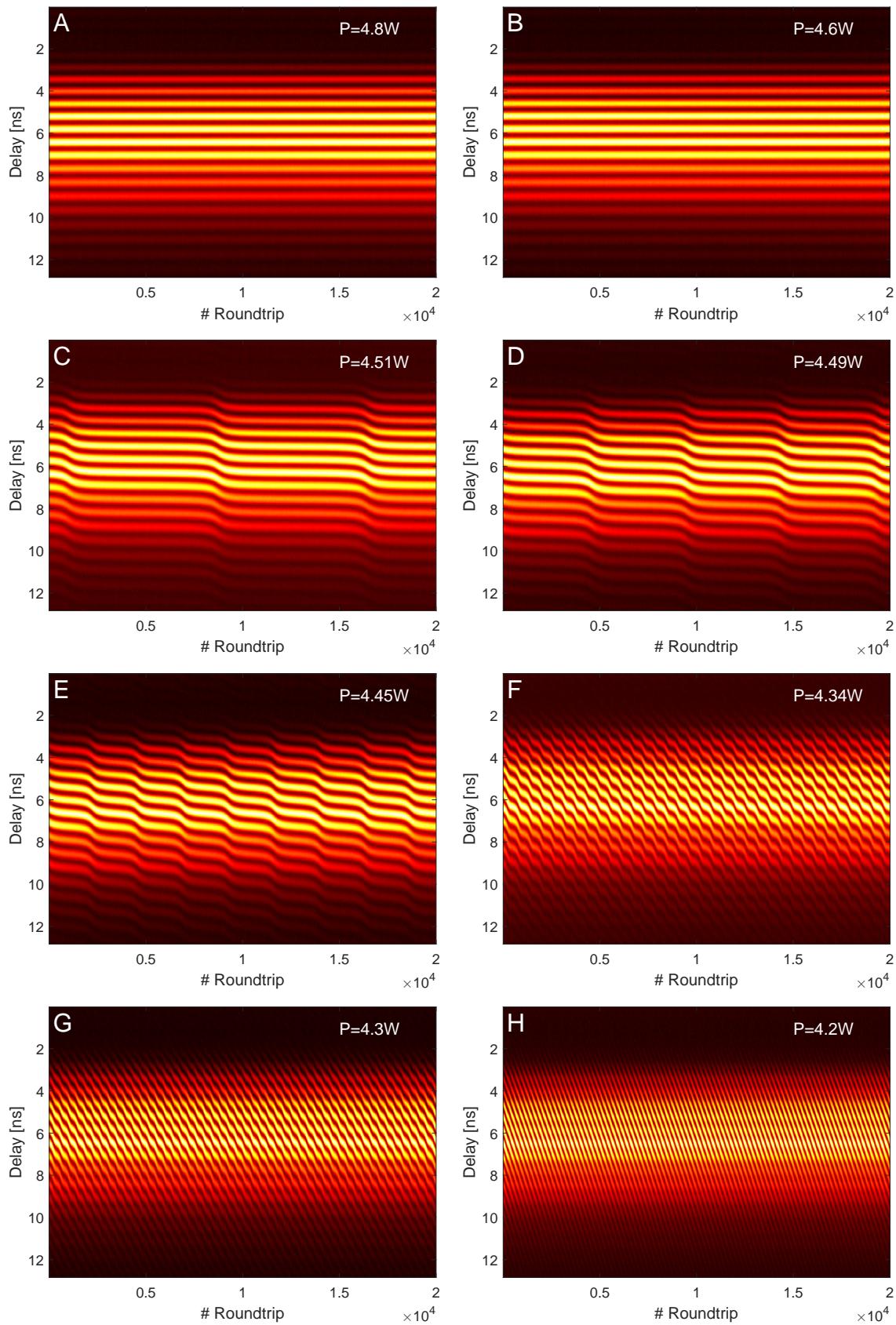


Abb. 4.11.: Verringerung der Pumpleistung: Von einer festen Phase über Stufen zu einer annähernd linear durchlaufenden Phase.

#### 4. Ergebnisse

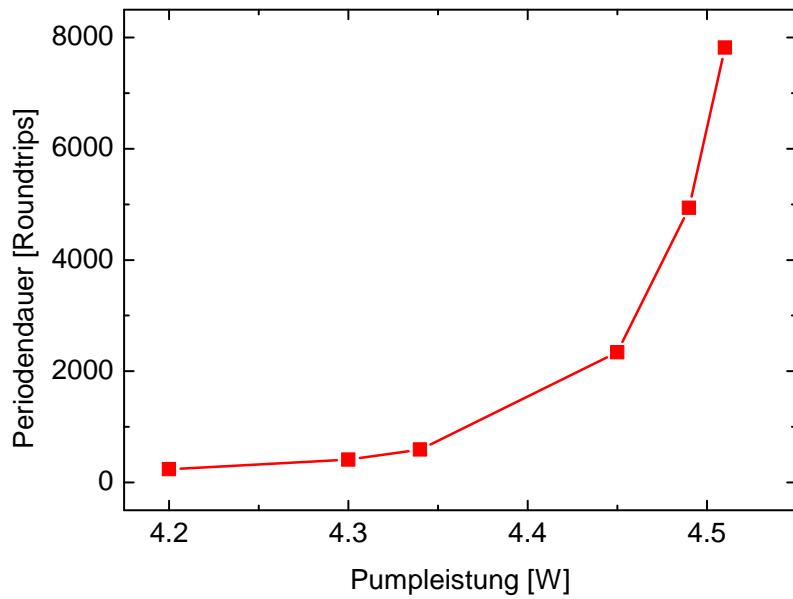


Abb. 4.12.: Anzahl an Roundtrips, innerhalb derer die relative Phase um  $2\pi$  zunimmt, in Abängigkeit der Pumpleistung: Die relative Phase wächst bei niedrigen Pumpleistungen schneller an.

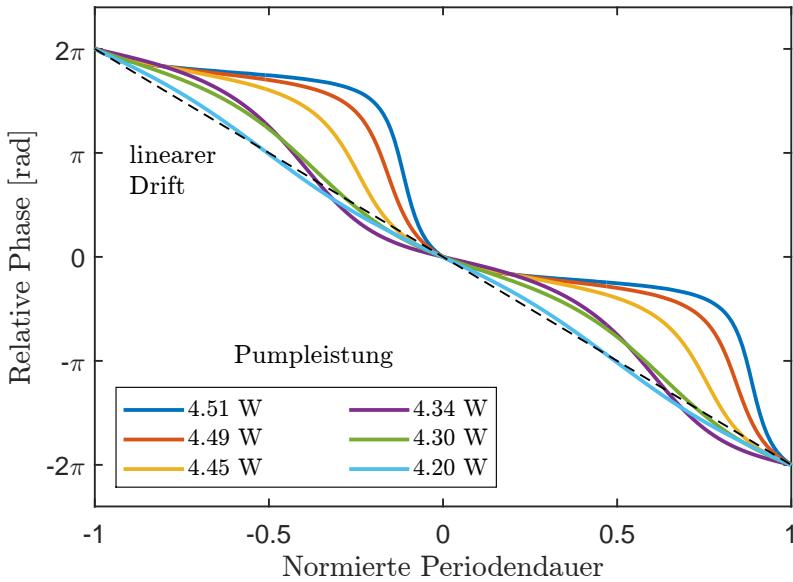


Abb. 4.13.: Phasenentwicklung über 2 Perioden für verschiedene Pumpleistungen mit der in Abb. 4.12 berechneten Zeit skaliert.

#### 4.4.2. Dreifach-Pulse

In Abbildung 4.14 ist die spektrale Entwicklung sowie die Autokorrelation vier verschiedener Triplet-Zustände dargestellt, die sich nach mehrmaliger Störung aus dem cw-Betrieb einstellen. In der Autokorrelation zeigen sich drei Abstände: der Abstand zwischen dem ersten und zweiten, zweiten und dritten sowie dem ersten und dritten Puls. Auffällig ist, dass nur bestimmte Pulsabstände vorkommen: 110 fs, 165 fs, 265 fs sowie 320 fs. Diese Abstände sind etwas größer als die in [Kitano und Kinoshita, 1998] für zwei 15 fs-Pulse gemessenen Abstände von 98 fs, 164 fs, 259 fs sowie 312 fs. Die hier betrachteten Pulse sind daher wahrscheinlich geringfügig länger. Im Spektrum lässt sich erkennen, dass die relativen Phasen oszillatorisches Verhalten sowie kontinuierliches Anwachsen aufweisen. Wird die Pumpleistung verringert, stirbt einer der Pulse aus. Die verbleibenden Beiden ändern ihren Abstand nicht grundlegend. Dieser neue Zustand ist also auch stabil und verdeutlicht noch einmal die nur diskret vorkommenden Pulsabstände.

#### 4. Ergebnisse

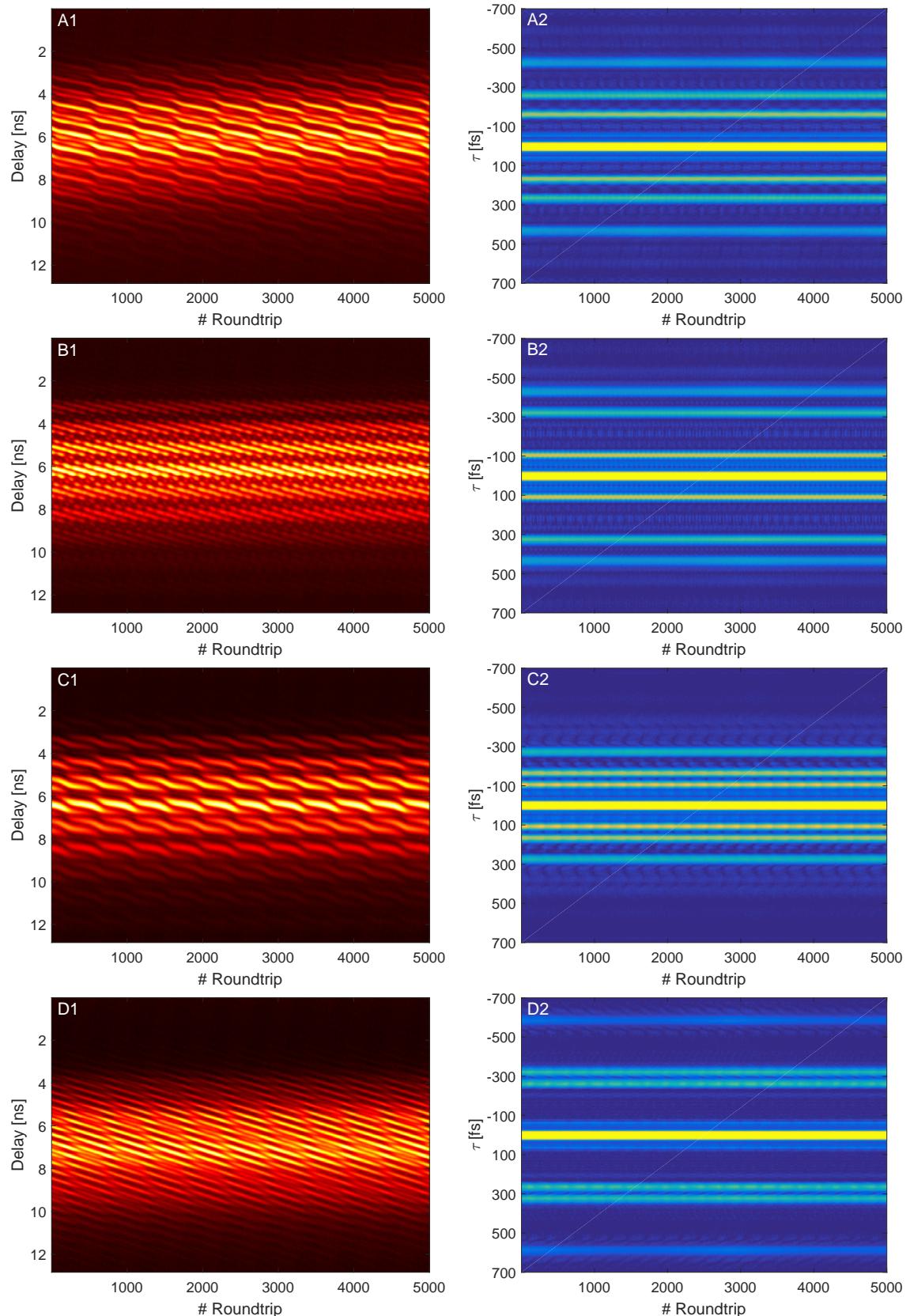


Abb. 4.14.: Verschiedene Triplet-Zustände: Spektrum und daraus berechnete Autokorrelation. Im Vergleich sind diskrete Pulsabstände zu erkennen.

## 4.5. Startdynamiken

In diesem Abschnitt werden die zwei beobachteten Prozesse vorgestellt, die zur Entstehung stabiler Doppelpulszustände führen: Zwei Fluktuationen wachsen nahezu gleichzeitig zu Femtosekundenpulsen an, sind aber mehrere 100 ps entfernt und nähern sich auf einer relativ langen Zeitskala an. Bei dem anderen Voragang wächst ein Puls so schnell an, dass die Selbstphasenmodulation dazu führt, dass sich dieser aufspaltet. Außerdem werden kurzebige, sich so gebildete Doppelpulse beobachtet.

### 4.5.1. Getrennte Starts zweier Pulse

In [Herink et al., 2016] wird dargestellt, wie eine Pikosekunden-Fluktuation spektral breiter, also kürzer wird und schließlich in einem Femtosekundenpuls endet. Im Unterschied dazu kann im Doppelpuls-Regime beobachtet werden, wie zwei verschiedene Fluktuationen anwachsen. In Abbildung 4.15 ist sowohl das undispergierte als auch das dispergierte Signal während der Entstehung dieser beiden Femtosekundenpulse zu sehen. Das dispergierte Signal repräsentiert anfangs nicht das Spektrum, sondern stellt eine spektral-temporale Sicht dar. So kann man anfangs die vielen Fluktuationen erkennen, die durch den Resonator propagieren.

Neu ist hier, dass einige Fluktuationen nach der Ausbildung des ersten Femtosekundenpulses nicht aussterben, sodass eine von diesen auch in die Modenkopplung übergehen kann. Erst dann propagieren nur diese beiden Pulse durch den Resonator.

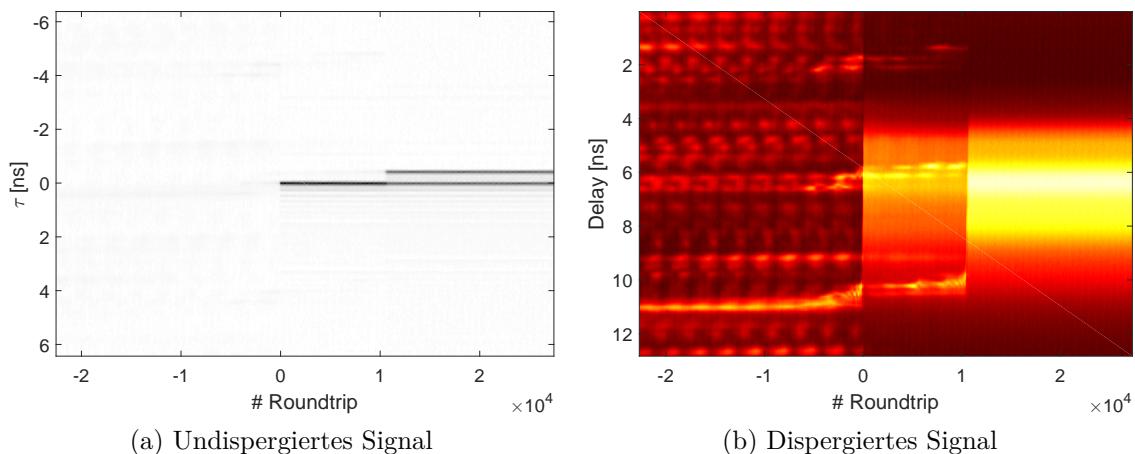


Abb. 4.15.: Innerhalb von etwa  $10^4$  Laserumläufen wachsen zwei Pikosekunden-Fluktuationen zu modengekoppelten Pulsen an. Der Pulsabstand beträgt anfangs ca. 430 ps.

## 4. Ergebnisse

Das undispergierte Signal wird für die Ermittlung der wichtigsten Eigenschaften der beiden Pulse verwendet: Die Entwicklung der Pulsennergien sowie des Pulsabstandes sind in Abbildung 4.16 dargestellt. Dabei wird über 50 Laserumläufe geglättet. Zur Bestimmung der Pulsennergien wird für beide Pulse die Höhe des Peaks im undispergierten Signal bestimmt. Es sollte aber beachtet werden, dass die Photodiode nach einem Puls noch nachschwingt bzw. langsamer abfällt. Dies bedeutet, dass die Energie des zweiten Pulses tendenziell überschätzt wird. Der bestimmte Energieunterschied könnte also noch etwas größer sein.

Bei der Abstandsbestimmung wird der Vorteil der Glättung sichtbar. Die zeitliche Auflösung der Originaldaten liegt nämlich bei 40 ps. Wird jedoch über mehrere Umläufe gemittelt, kann der Abstand genauer bestimmt werden. So wird beobachtet, dass die beiden Pulse sich näher kommen. Dies kann man darauf zurückführen, dass der hintere und somit schwächere Puls aufgrund des Kerr-Effektes schneller durch den Laserkristall propagierte und sich daher der Pulsabstand verringert.

Der Anfangsabstand von etwa 430 ps scheint nicht willkürlich zu sein. Diesen kann man auch in Abbildung 4.3d identifizieren. Bevor dort nur ein modengekoppelter Puls durch den Resonator propagierte, können etwa sechs äquidistante Fluktuationen pro Laserumlauf beobachtet werden. Während eine dieser Fluktuationen schwächer wird, wächst gleichzeitig im Abstand von 400 bis 450 Pikosekunden eine neue an. Der Abstand könnte der Abweichung vom 2:1-Verhältnis zwischen langem und kurzem Arm des Laserresonators entsprechen (vgl. Abschnitt 5.2).

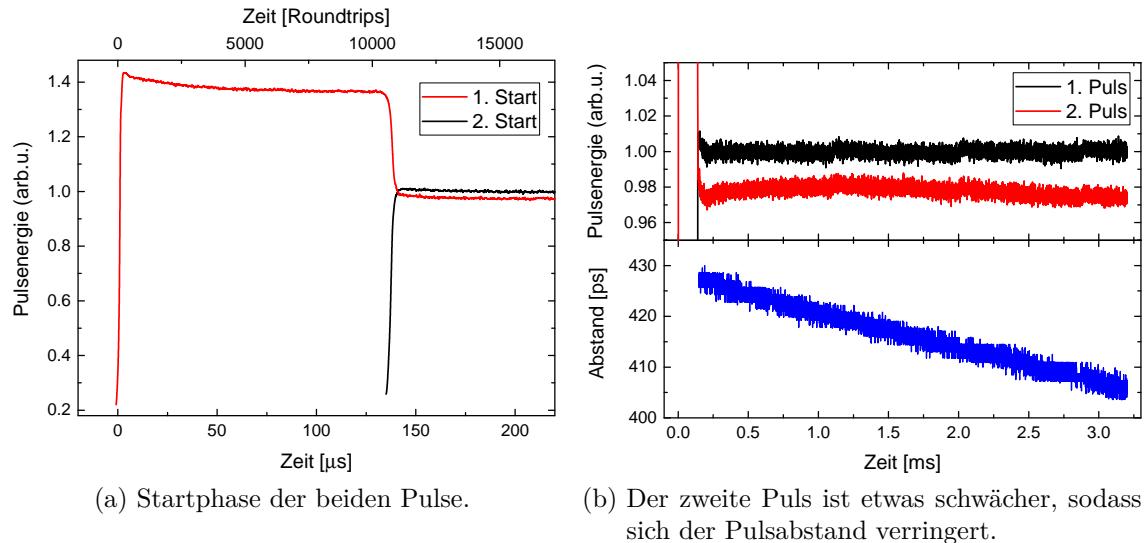


Abb. 4.16.: Auswertung der 2 getrennt startenden Femtosekundenpulse aus Abb. 4.15: Entwicklung der beiden Pulsennergien sowie des Pulsabstandes.

### 4.5.2. Annäherung zweier Pulse

Der Zeitpunkt, bei dem sich obige Pulse auf unter 1 ps angenähert haben, kann leider nicht mehr aufgenommen werden, da dazu der Speicher des Oszilloskop nicht genügt. Nimmt man obige Rate von ca. 20 ps auf 3 ms an, würde dies mehr als 60 ms dauern. Stattdessen kann aber auf eine solche Annäherung getriggert werden. Dazu wird das dispergierte Signal verwendet, denn ein solcher Pulsabstand führt zu Modulationen im Spektrum, sodass die Peakspannung dieses Signals ansteigt und schließlich über dem eingestellten Grenzwert liegt. In Abbildung 4.17 wird das Spektrum sowie die daraus berechnete Autokorrelation einer solchen Annäherung dargestellt. Auffällig ist, dass der Pulsabstand nicht linear abnimmt, sondern leicht stufenförmig. Die relative Phase nimmt beschleunigend zu, bis die nächste Stufe erreicht ist. Die stabileren Abstände sind vergleichbar mit den diskreten Pulsabständen, die bei den Tripletzuständen auftreten. Ein Endabstand von ca. 170 fs sowie eine feste relative Phase stellen sich hier schließlich ein.

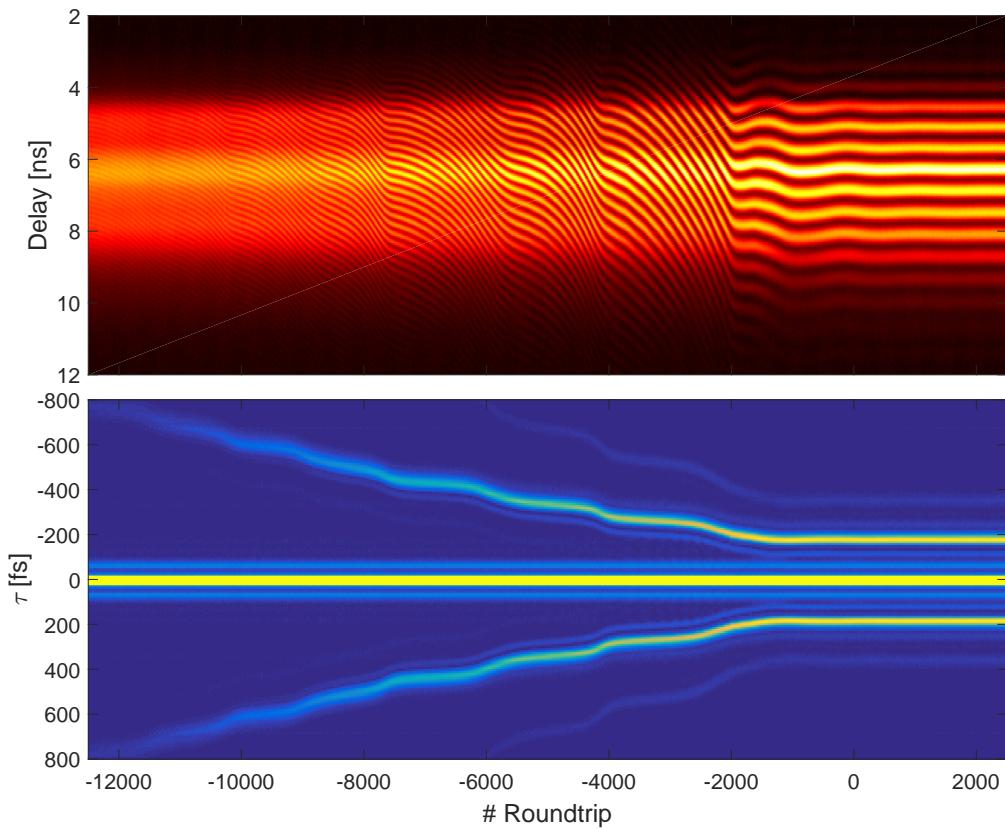


Abb. 4.17.: Pulsannäherung bis ein stabiler Doppelpulszustand erreicht ist  
(*oben:* Spektrale Entwicklung, *unten:* Autokorrelation).

#### 4. Ergebnisse

Der oben abgebildete Annäherungsprozess kann auch mit einer anderen Geschwindigkeit ablaufen: Die Autokorrelation der zwei Extremfälle sind in Abbildung 4.18 zu sehen. Nähern sich die beiden Pulse sehr langsam an, können diskrete Pulsabstände beobachtet werden, die schon bei den Triplet-Zuständen beschrieben wurden. So verharren die beiden Pulse längere Zeit bei diesen Abständen, bevor sie sich weiter annähern und schließlich der stabile Zustand gefunden wird. Dies deutet darauf hin, dass die Pumpleistung für die größeren Pulsabstände zu niedrig ist.

Im anderen Fall nähern sich die beiden Pulse sehr schnell an, der Intensitätsunterschied ist also sehr groß. Dabei kommt es zu einer Abstoßung, der Pulsabstand vergrößert sich also nochmal bevor er sich wieder verkleinert und ein stabiles Pulspaars gebildet wird. Dieser Prozess ähnelt der Abstoßung aus Abbildung 4.9b. Hier dient dies eventuell dem Energieaustausch, sodass die Bedingungen für einen stabilen Zustand hergestellt werden können.

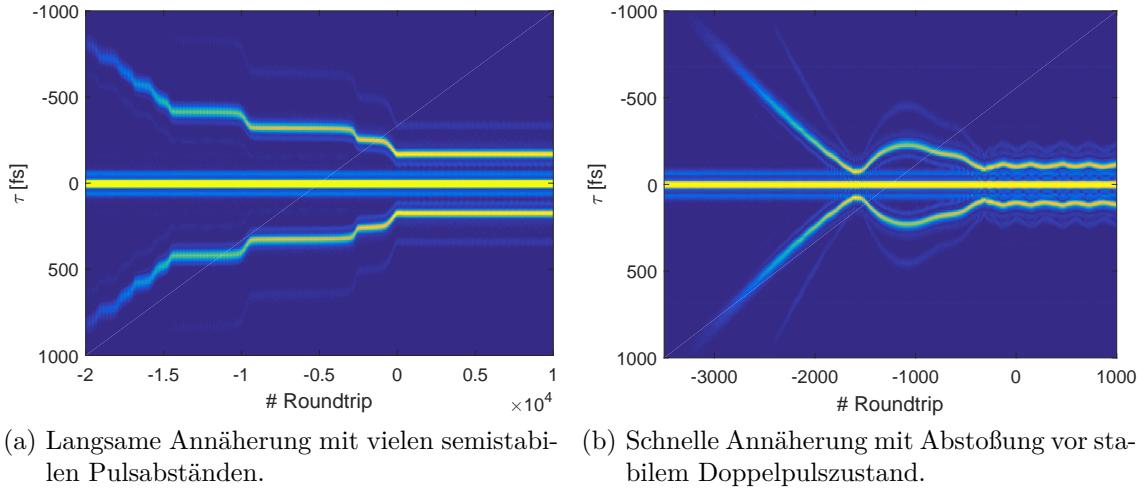


Abb. 4.18.: Autokorrelation zweier beispielhafter Annäherungen.

### 4.5.3. Aufspalten eines Pulses

Nachdem in den vorigen Abschnitten gezeigt wurde, wie sich zwei, anfangs weit entfernte Pulse annähern und schließlich einen stabilen Doppelpulszustand formen, soll hier das Gegenteil illustriert werden: das Aufspalten eines Pulses wie es beispielhaft in Abbildung 4.19 dargestellt ist. Während das Spektrum breiter wird, sind gleichzeitig schon Modulationen auf diesem zu sehen. Es handelt sich also um Doppelpulse, die sich voneinander entfernen. Zu erkennen ist außerdem, dass die Änderungsrate der relativen Phase anfangs positiv ist. Wenn sich jedoch der stabile Pulsabstand einstellt, wird diese Rate leicht negativ. Dies lässt darauf schließen, dass zuerst der spätere Puls der stärkere ist und sich der erste aufgrund des Kerr-Effektes entfernt. Ist der Pulsabstand groß genug, findet ein Energieaustausch statt, der erste Puls erstarkt und ist schließlich stärker als der zweite Puls. Der Abstand stabilisiert sich.

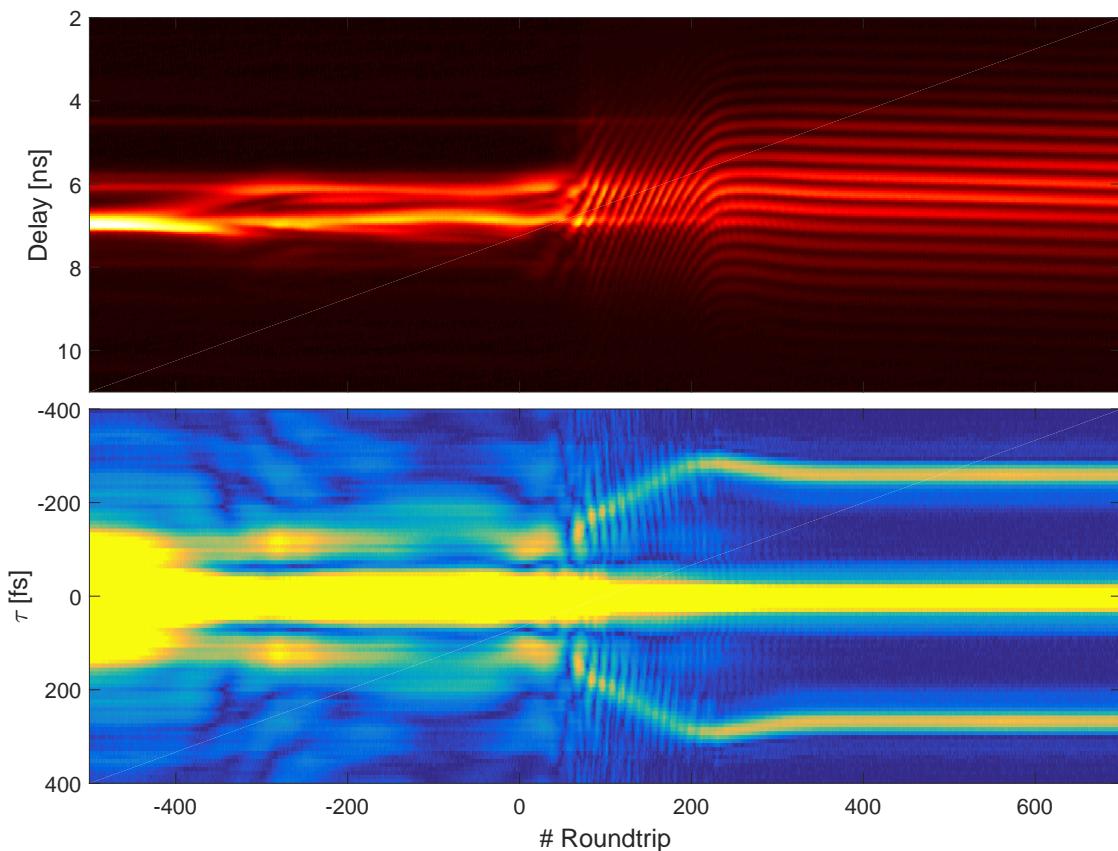


Abb. 4.19.: Anwachsen einer Pikosekunden-Fluktuation und gleichzeitiges Aufspalten des sich ausbildenden Femtosekundenpulses (*oben*: Spektrale Entwicklung, *unten*: Autokorrelation).

## 4. Ergebnisse

### 4.5.4. Transiente Doppelpulse

Der hier vorgestellte Fall kurzlebiger Doppelpulse ist sehr selten, so konnte er bisher nur zweimal beobachtet werden. Der Resonator war dabei auf den Einzelpulsbetrieb justiert. In Abbildung 4.20 ist zu erkennen, dass sich der entstehende Puls aufspaltet und die beiden resultierenden Pulse über die gesamte Lebensdauer des Doppelpulszustandes einen konstanten Abstand von etwa 265 fs aufweisen. Nach ca. 2000 Laserumläufen, also viel länger als die Lebensdauer des oberen Laserniveaus von  $3.2 \mu\text{s}$ , wird einer der beiden Pulse länger und stirbt aus. Es wird vermutet, dass dies der spätere Puls ist, da dieser eine geringere Besetzungsinversion im Kristall vorfindet. Da hier aber nur die Autokorrelation gemessen werden kann, kann dies nicht verifiziert werden.

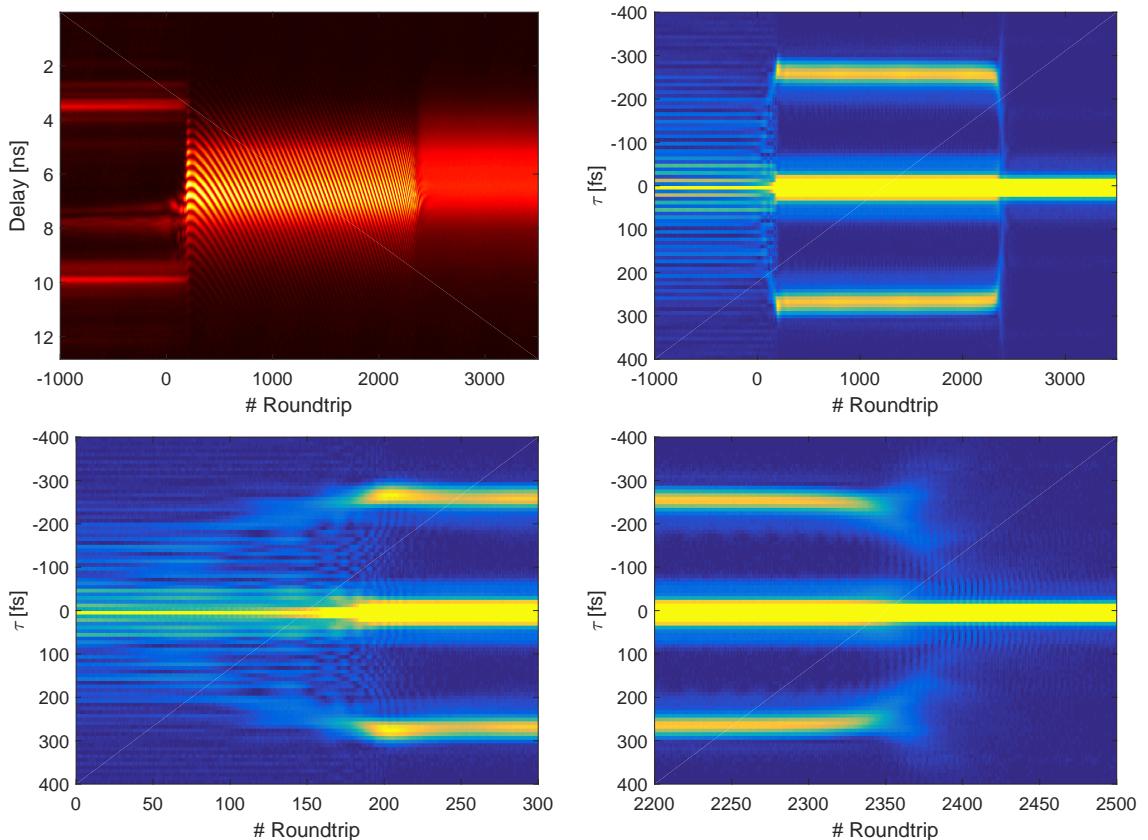


Abb. 4.20.: Transiente Doppelpulse: Nach Aufspalten in zwei Pulse und mehr als 2000 Laserumläufen in einem semistabilen Doppelpulszustand stirbt einer der beiden Pulse aus (*oben links*: Spektrale Entwicklung, *oben rechts*: Autokorrelation, *unten*: Entstehen und Aussterben als Ausschnitt der Autokorrelation).

Die Abbildung 4.21 zeigt die zeitliche Entwicklung der emittierten Energie pro Roundtrip. Bei der Ausbildung der Femtosekundenpulse kommt es zu Relaxationsoszillationen. Danach ist die Energie beider Pulse konstant und liegt etwa 18.5% über der des Einzelpulses, der nach dem Aussterben des anderen alleine durch den Laser propagiert. Die relative Phase wächst jedoch beschleunigt an. Dies deutet darauf hin, dass das Ungleichgewicht der beiden Pulse zunimmt: Der erste Puls gewinnt kontinuierlich an Energie, während der zweite langsam schwächer wird. Fällt die Pulsennergie unter einen bestimmten Wert, beschleunigt sich dieser Prozess dramatisch und der Puls stirbt aus. Der überlebende Puls kann jetzt spektral breiter und energiereicher werden.

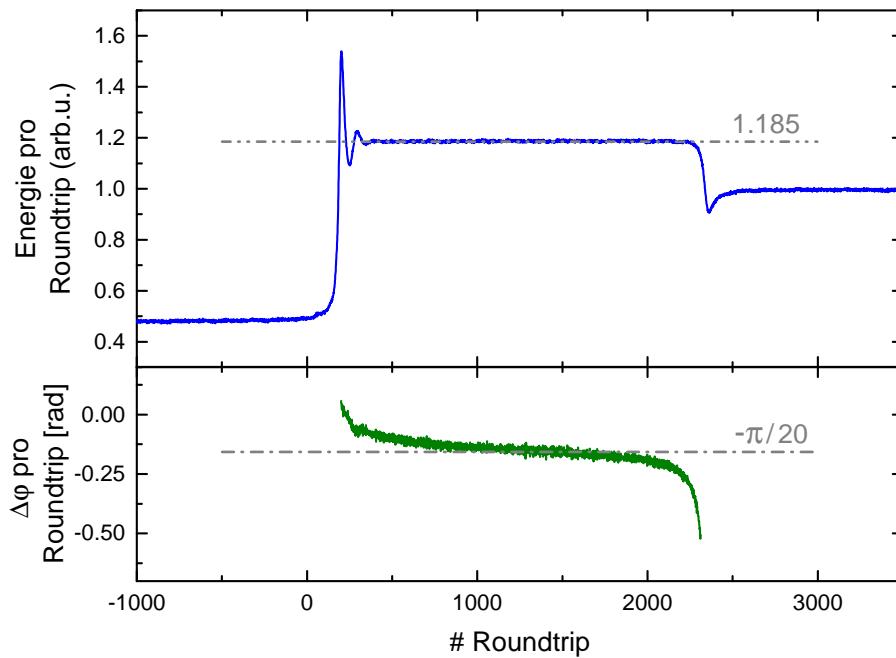


Abb. 4.21.: Transiente Doppelpulse: Während die Gesamtenergie beider Pulse lange konstant ist, lässt die Zunahme der Änderungsrate der relativen Phase auf ein Anstieg des Ungleichgewichts zwischen beiden Pulsen schließen.

## 4.6. Multipulse bei Q-Switch-Instabilitäten

In diesem Abschnitt wird ein weiterer interessanter Betriebsmodus präsentiert. Dazu wird zuerst ein stabiler modengekoppelter Femtosekundenpuls erzeugt. Danach wird der Abstand der beiden Fokussierspiegel (Stabilität) verringert, sodass die Verluste im Resonator größer werden. Dies impliziert eine selbst erregte, starke Modulation der emittierten Leistung mit einer Modulationstiefe von mehr als 90% (siehe Abb.4.22). Ein solcher Zyklus dauert etwa 172 Roundtrips, ca. 2.21  $\mu$ s, ist also etwas kürzer als die Lebensdauer des oberen Laserniveaus von 3.2  $\mu$ s. Dieses Verhalten wird Selbst-Güteschaltung (*self-Q-switching*) genannt. Aufgrund des rapiden Leistungsanstiegs spaltet sich jedoch in vielen Fällen der gerade entstehende Puls auf, sodass für eine kurze Zeitspanne zwei Femtosekundenpulse im Laser propagieren. Sogar drei Pulse entstehen manchmal.

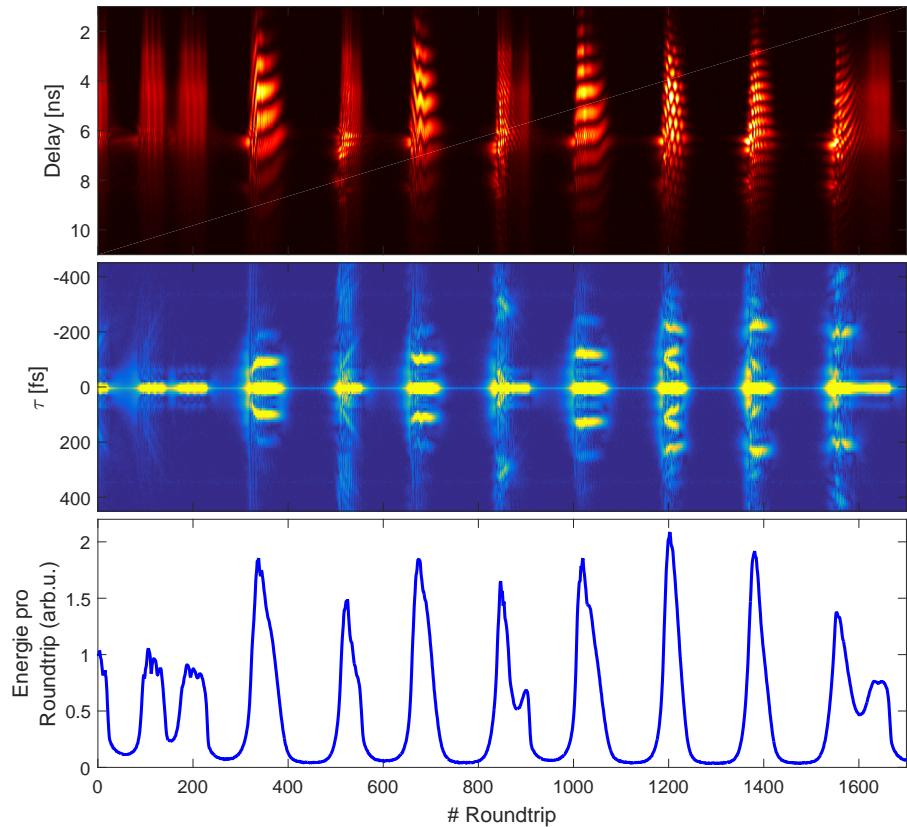


Abb. 4.22.: Höhere Verluste im Resonator führen zu selbstverursachten Leistungsmodulationen auf einer Zeitskala der Lebensdauer des oberen Laserniveaus: Dabei können sich hier sogar bis zu drei Pulse ausbilden – gefolgt von einer Phase nahezu keiner Laseremission. (*oben:* Spektrale Entwicklung, *mitte:* Autokorrelation, *unten:* Energie).

## 4.7. Simulation

Einige der oben beschriebenen Vorgänge lassen sich mit dem vorgestellten numerischen Modell aus Abschnitt 2.3 nachvollziehen. Im folgenden werden 3 verschiedene Dynamiken präsentiert, die sich nur durch kleine Änderungen der Simulationsparameter bzw. Anfangsbedingungen ergeben. Dazu werden die Eigenschaften des Lasermediums aus Tabelle 2.1 sowie des Resonators (Tabelle 2.2) verwendet. Einige Parameter werden aber auch aus diesen Größen berechnet: So wird die Selbstphasenmodulation  $\beta$  durch die Kristalllänge  $x$  und den Kerr-Index  $n_2$  bestimmt:  $\beta = \frac{2\pi \cdot n_2 \cdot 2x}{\lambda_0 \cdot n}$ . Weitere berechnete Größen sind die Sättigung des Lasermediums  $E_s$  sowie der Pumpparameter  $P$ . Diese und die anderen verwendeten Parameter finden sich in Tabelle 4.1 wieder. Unter diesen Bedingungen ergeben sich Doppelpulse mit einer Pulslänge von etwa 28 fs.

Größe	Wert
Selbstphasenmodulation	$\beta = 5.36 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2/\text{W}$
Selbstamplitudenmodulation	$\sigma = 60\beta$
Modulationstiefe des sätt. Absorbers	$\gamma = 0.24$
Dispersion	$D_0 = -50 \text{ fs}^2$
Sättigungsenergie	$E_s = 6.06 \text{ kJ/m}^2$
Pumpparameter	$P = 5.7 \cdot 10^{-3}$

Tab. 4.1.: Weitere Simulationsparameter.

Die Simulation startet immer mit zwei gaussförmigen Pulsen, deren weitere Eigenschaften in Tabelle 4.2 aufgeführt werden. Variiert wird deren Anfangsabstand sowie die Pumpleistung.

Größe	Wert
Pulsform	2 Gaußförmige Pulse
Pulsamplitude	$1/\beta$
Pulslänge	25 fs @ 1/e der Pulsamplitude
Pulsabstand	$\tau_0 = 100, 200 \text{ fs}$

Tab. 4.2.: Anfangszustand der Simulation.

## 4. Ergebnisse

### 4.7.1. Linear anwachsende Phase

Der erste Fall behandelt den Fall einer linear anwachsenden relativen Phase aufgrund ungleicher Pulsamplituden, da hier die Verringerung der Besetzungsinversion durch den ersten Puls in Betracht gezogen wird. In Abbildung 4.23 ist die zeitliche sowie die spektrale Entwicklung dargestellt. In Abb.4.24 werden die Simulationsdaten ausgewertet, also die Pulsamplituden, der Pulsabstand und die relative Phase bestimmt. So lässt sich die Simulation besser mit den Messdaten vergleichen. Eine leichte Oszillation der Pulsamplituden und somit auch des Abstandes ist zu erkennen. Das simulierte Verhalten hat starke Ähnlichkeiten zu Messungen wie in Abb.4.11 H, bei denen die Phase linear anwächst. Der große Unterschied besteht jedoch in der Wahl des Pulsabstandes: Während in den Messungen stets diskrete Abstände beobachtet wurden, wird in der Simulation der Anfangsabstand beibehalten. Die beiden Pulse interagieren also nicht bzw. nur sehr schwach. Die hier simulierte Zeittdauer beträgt aber auch nur 3000 Laserumläufe, während eine Messung etwa zwei Größenordnungen länger ist. Eine längere Simulationsdauer ist also unter Umständen zur korrekten Beschreibung erforderlich, benötigt jedoch viel Speicherplatz. Eine andere Erklärung ist die Änderung der Pulslänge während eines Laserumlaufes, welche stärker als angenommen sein könnte und somit im benutzen Modell keine Beachtung findet. Dann wäre evtl. die Interaktion zwischen beiden Pulsen größer, sodass nur bestimmte Abstände stabil wären.

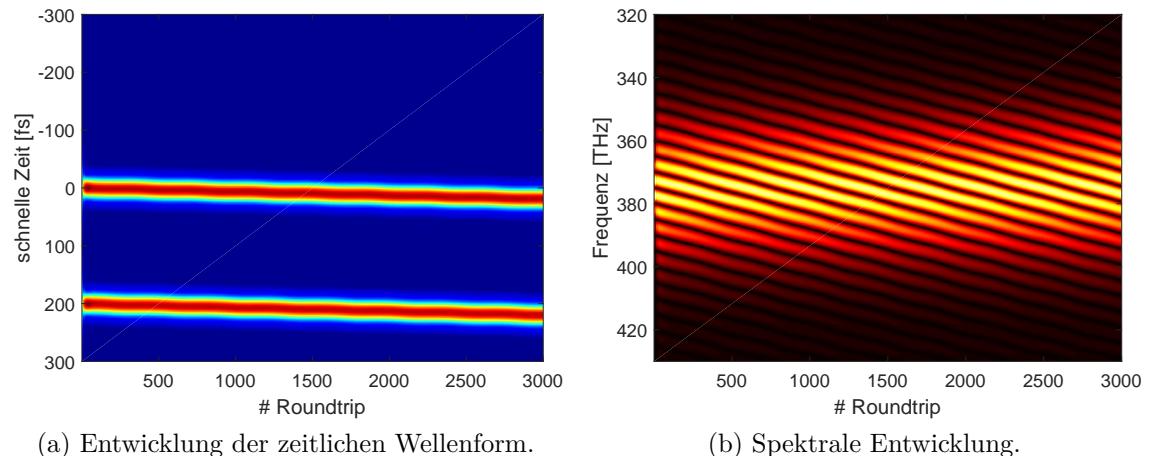


Abb. 4.23.: Simulation mit einem Anfangsabstand von  $\tau_0 = 200$  fs sowie einer Pumpleistung von  $P_{\text{Pump}} = 4.6$  W. Die beiden Pulse interagieren kaum, aufgrund leicht unterschiedlicher Pulsamplituden wächst die relative Phase zwischen beiden linear an.

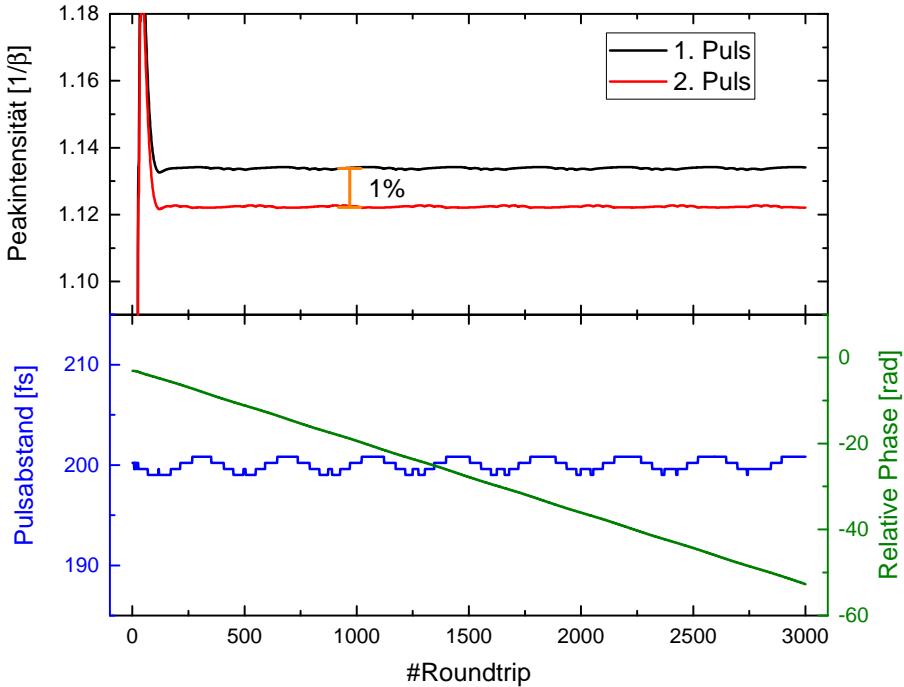


Abb. 4.24.: Auswertung der Simulation aus Abb.4.23: Energieverhältnis und Abstand der beiden Pulse ist nach einer kurzen Transiente nahezu konstant, sodass die relative Phase linear anwächst.

### 4.7.2. Oszillatorisches Verhalten

Der zweite simulierte Fall unterscheidet sich von obigem nur durch einen kleineren Anfangsabstand  $\tau_0 = 100$  fs. Nun können die beiden Pulse interagieren und es kommt zu Abstoßungs- und Anziehungseffekten, welche in einer oszillatorischen Bewegung mit einer Periodendauer von 330 Laserumläufen enden (vgl. Abb.4.25). Dieses Verhalten führt auch dazu, dass sich die beiden Pulse im Simulationsfenster immer weiter nach vorne bewegen, also schneller durch den Resonator propagieren als ein einzelner Puls. Absolut gesehen ist dieser Effekt jedoch gering: So sind die Pulse bei 3000 Laserumläufen, also ca. 40  $\mu$ s, etwa 300 fs schneller.

In Abbildung 4.26 sind die beiden Pulsamplituden, die relative Phase und der Pulsabstand während der Oszillationszyklen dargestellt. Zu erkennen ist, dass der zweite Puls in einem Fünftel des Zykluses stärker als der erste ist. Etwa zeitgleich vergrößert sich der Pulsabstand. Pro Zyklus gibt es zwei Punkte, an denen beide Pulse gleich stark sind und die Phase ein lokales Extremum hat. Außerdem ändert sich die Phase bei einem hohen Intensitätsunterschied zwischen beiden Pulsen sehr schnell. Beides zeigt klar, dass die Änderung der relativen Phase stark mit den

#### 4. Ergebnisse

Pulsamplituden verknüpft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Abstand. Gleiche Pulsamplituden haben jedoch keinen festen Pulsabstand zu Folge, die Änderung des Abstandes lässt sich also nicht nur durch den Kerr-Effekt erklären.

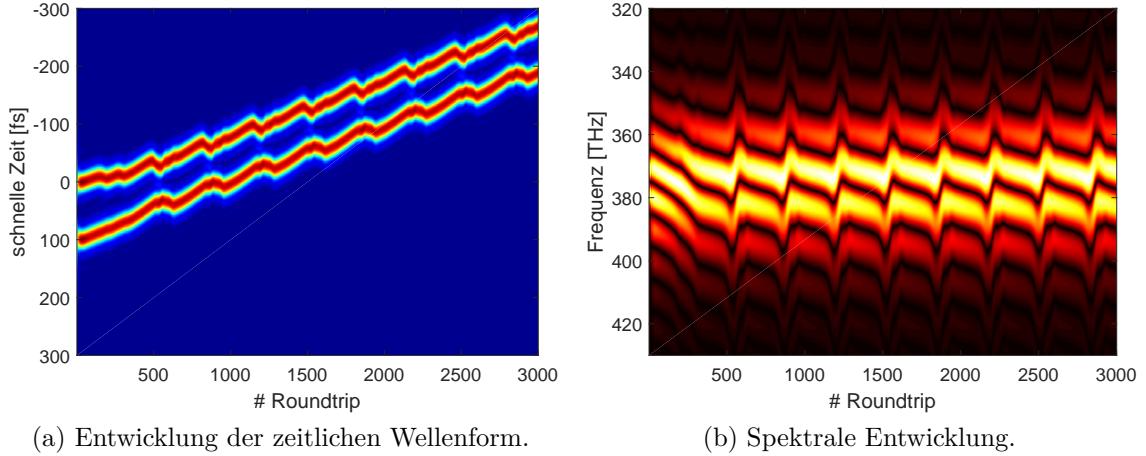


Abb. 4.25.: Simulation ( $\tau_0 = 100$  fs,  $P_{\text{Pump}} = 4.6$  W), bei der Abstand und relative Phase oszillieren, da sich die beiden Pulse immer wieder leicht abstoßen.

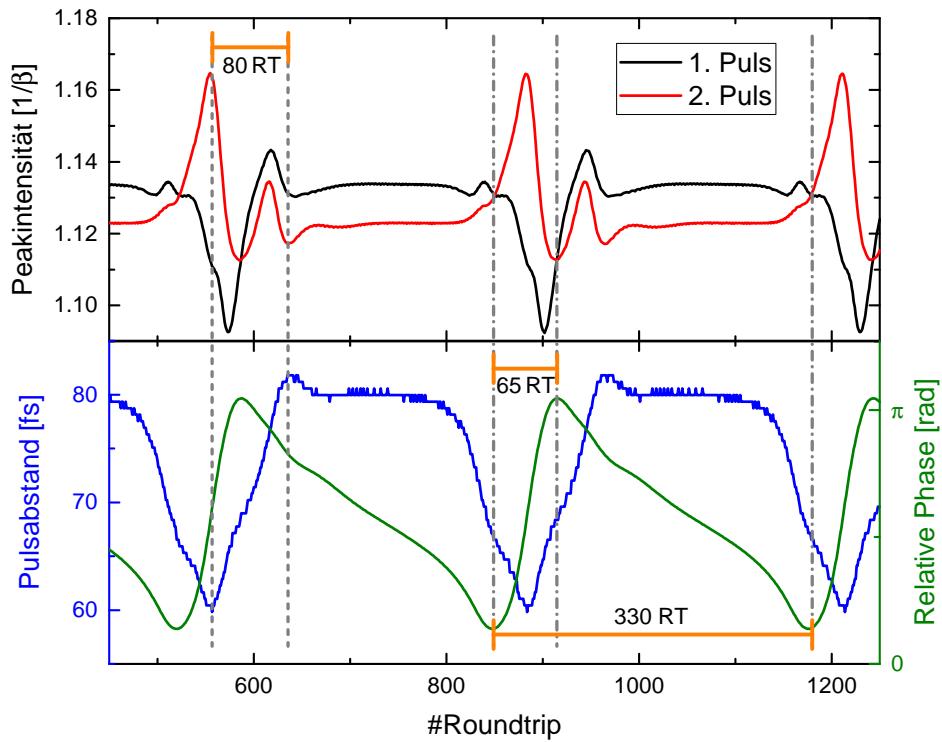


Abb. 4.26.: Auswertung der Simulation aus Abb.4.25: Das Amplitudenverhältnis der Pulse ist stark mit dem Pulsabstand und der relativen Phase verknüpft.

In Abbildung 4.27 ist diese Oszillationsdynamik in die *Interaction Plane* eingezeichnet, es ergibt sich ein geschlossener Orbit. Zu beachten ist, dass der innere Halbkreis und der Abschnitt, in dem sich die beiden Pulse voneinander entfernen, sehr schnell durchlaufen wird. Nur in einem Viertel der Oszillationsperiode wächst der Abstand an. Vergleicht man den Pulsabstand, welcher stets zwischen 60 und 80 Femtosekunden liegt, mit dem aus ähnlichen Messungen wie in Abb.4.5, ist er in der Simulation kleiner und ändert sich prozentual stärker.

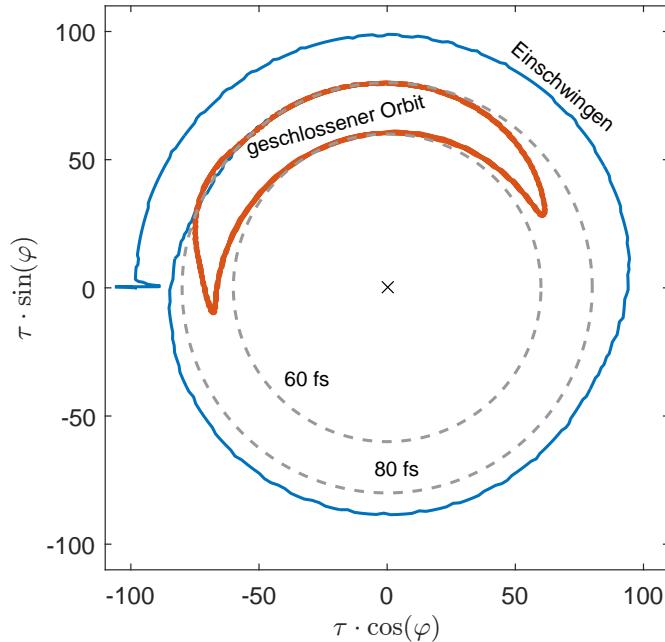


Abb. 4.27.: Oszillatorisches Verhalten in der Interaction Plane.

### 4.7.3. Fester Abstand und feste Phase

Der dritte Fall unterscheidet sich von den bereits diskutierten durch eine höhere Pumpleistung. Dies führt dazu, dass die beiden Pulse einen festen Abstand und eine feste Phase, also einen wirklichen Endzustand, annehmen. In Abbildung 4.28 ist dies sowohl im Spektrum als auch im Zeitsignal zu erkennen. Durch Auswerten der Simulation (Abb.4.29) erkennt man, dass der erste Puls im Endzustand nur ca. 2.5% stärker als der andere ist. Außerdem lässt sich ablesen, dass die relative Phase etwa bei  $\pi$  gelockt ist. Die beiden Pulse sind also sehr ähnlich, aber gegenphasig. Die Simulation beginnt mit einem Annäherungsprozess, bei dem 10 fs - Stufen beobachtet werden können. Diese sind also sehr viel kleiner als die gemessenen Abstandsunterschiede von ungefähr 60 – 100 fs. Der Endabstand beträgt ca. 64 fs, ist also nur etwa

#### 4. Ergebnisse

doppelt so groß wie die Pulslänge von 28 fs (FWHM). In den Messungen aus den Abbildungen 4.11 A+B beträgt der Pulsabstand jedoch ca. 170 fs bei vergleichbarer Pulslänge.

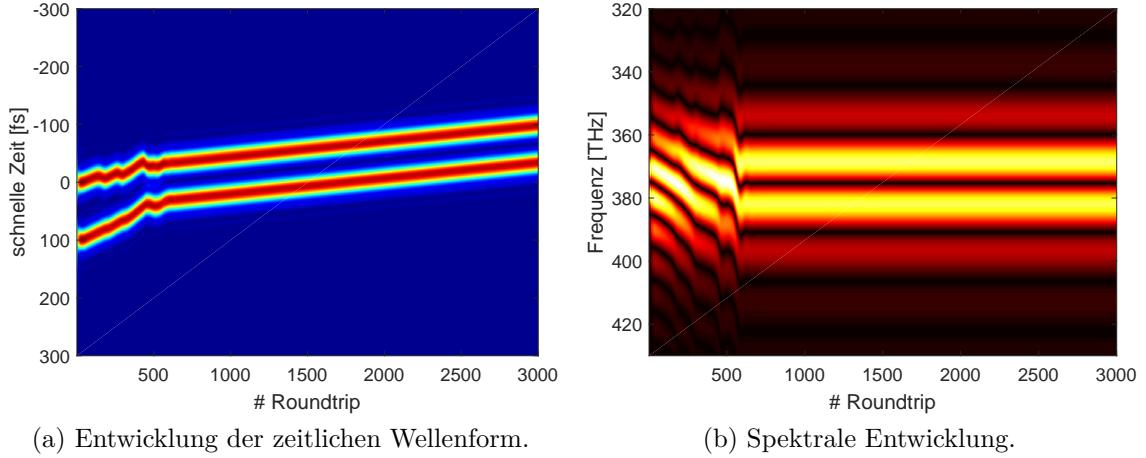


Abb. 4.28.: Simulation ( $\tau_0 = 100$  fs,  $P_{\text{Pump}} = 4.8$  W), bei der die Pumpleistung höher ist, sodass die beiden Pulse ihren Abstand und ihre relative Phase locken können.

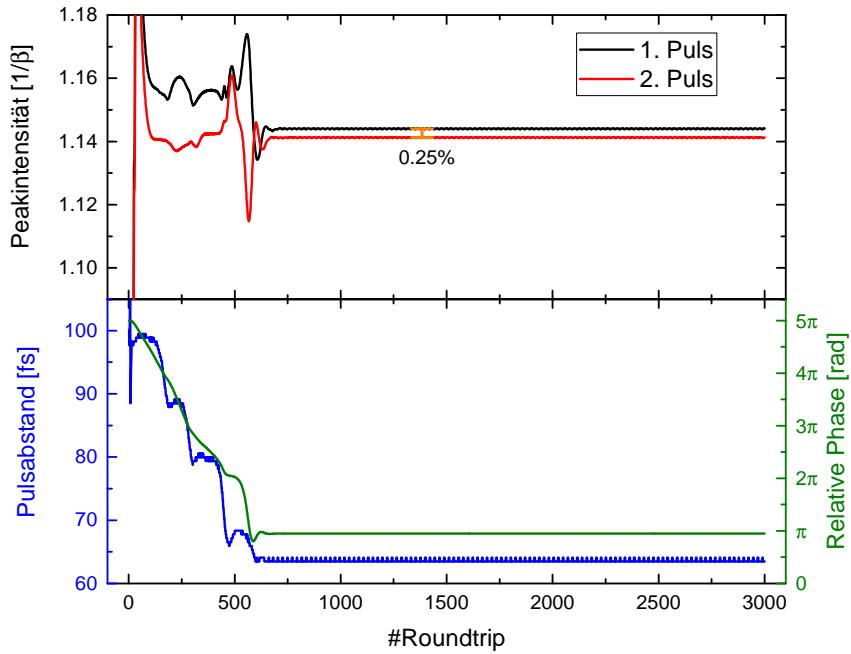


Abb. 4.29.: Auswertung der Simulation aus Abb.4.28: Nach einer stufenförmigen Annäherung sind die Pulsamplituden, der Pulsabstand sowie die relative Phase schließlich konstant. Die Pulse sind dabei gegenphasig.

# 5. Zusammenfassung und Ausblick

Mit Echtzeit-Methoden konnten in dieser Arbeit eine Vielzahl bisher verborgener Dynamiken in Ultrakurzpuls-Lasern enthüllt werden. Dazu zählen unter anderem Phasen- und Abstandsentwicklungen von **Solitonen-Molekülen**. Für diese stabilen Doppelpuls-Konfigurationen konnten zuvor nur deren diskrete Pulsabstände beobachtet werden. Hier konnte für den kleinsten dieser Abstände ein oszillatorisches Verhalten detektiert werden, welches stark von der Pumpleistung beeinflusst wird (vgl. Abschnitt 4.3.1). Außerdem wurde für den nächstgrößeren Abstand beobachtet, wie anfangs phasengelockte Pulse durch Reduktion der Pumpleistung zunächst eine stufenförmige Zunahme der relativen Phase erfahren, bis diese schließlich kontinuierlich zunimmt (vgl. Abschnitt 4.4.1). Diese beiden faszinierenden Dynamiken können nur schwer mit herkömmlichen Methoden gemessen werden, da diese in der Mittelung über viele Laserumläufe verschwinden.

Außerdem wurde mit den **wiederkehrend kollidierenden Pulsen** (vgl. Abschnitt 4.3.2) ein neuer Zustand beobachtet, der sich nur mit Echtzeit-Methoden messen lässt. So lässt das gemittelte Spektrum keinerlei Modulationen erkennen, und auch durch eine mittelnde Messung der Autokorrelation hätte dieser Zustand nicht entdeckt werden können, da der Pulsabstand zu stark variiert. Mit der Pumpleistung lässt sich grob kontrollieren, wie weit sich die beiden Pulse entfernen. Die Vorgeschichte beeinflusst jedoch auch, wann die Abstandsverringerung eintritt.

In Abschnitt 4.3.3 wurde hingegen ein Zustand entdeckt, der auch mit Photodiode beobachtet werden hätte können, welche für die Analyse und Justage gepulster Oszillatoren verwendet werden. Dort propagieren zwei **Einzelpulse mit verschiedenen Geschwindigkeiten** durch den Resonator. Dies lässt sich durch unterschiedliche Pulsamplituden erklären, wurde jedoch zuvor – nach bestem Wissen und Gewissen des Autors – noch nie beschrieben. Ähnliches wurde zwar in [Grelu und Akhmediev, 2004] berichtet: Dort propagiert ein Einzelpuls und ein Doppelpuls durch den Resonator. Das Pulspaar ist dabei jedoch schneller, während hier der Kerr-Effekt zu einer geringeren Geschwindigkeit des intensiveren Pulses führt.

## 5. Zusammenfassung und Ausblick

Die Stärke von Echtzeit-Methoden liegt vor allem im Enthüllen von **transienten Dynamiken**, welche hier z.B. während der Pulsentstehung (Abschnitt 4.5.4) beobachtet wurden. Durch große Messkampagnen wie das oftmalige Starten in den Pulsbetrieb unter immer den gleichen Bedingungen könnten diese seltenen Ereignisse besser verstanden werden. Außerdem konnte in Echtzeit beobachtet werden, wie sich die Pulse bei Q-Switch-Instabilitäten (Abschnitt 4.6) verhalten. Diese Leistungsmodulation wurde in [Xing et al., 1995] und [Jasapara et al., 2000] beschrieben. Dabei wurde angenommen, dass nur ein Puls durch den Resonator propagiert. Hier konnte jedoch auch die Entstehung von Multipulsen beobachtet werden.

Viele der beobachteten Dynamiken lassen sich mit dem **Kerr-Effekt** und der daraus resultierenden, von der Intensität abhängigen Pulsgeschwindigkeit erklären. Trotzdem sind noch viele Fragen offen. Für ein besseres Verständnis der verschiedenen Regime ist es nützlich, wenn die Simulation in Einklang mit den Messdaten gebracht werden kann. In den nächsten beiden Abschnitten werden zwei weitere wichtige Fragen diskutiert, die sich vor allem mit dieser Echtzeit-Methode beantworten lassen: Woher stammen die beobachteten Multipulse? Und was passiert, wenn sich zwei Pulse im Kristall begegnen?

### 5.1. Begegnung von Pulsen im Kristall

Während der Messungen konnte das sogenannte *Colliding Pulse Modelocking* beobachtet werden. Dabei propagieren zwei Pulse durch den Resonator, die sich im Laserkristall treffen und so den gemeinsamen Kerr-Effekt ausnutzen können, sodass beide eine höhere Verstärkung erfahren. Dieser Zustand ist sehr stabil und wurde zuerst von [Lai et al., 1997] in einem Ti:Sa-Laser beschrieben. Interessant ist aber der Prozess, bevor dieser stabile Zustand erreicht wird. Typischerweise modelockt eine Fluktuation, während die anderen Fluktuationen aber nicht völlig aussterben. Eine weitere Fluktuation wächst nun an, sodass auch diese modelockt (vgl. Abb.4.15). Daraufhin bewegen sich die beiden Pulse relativ zueinander, da sie nicht gleich stark sind und aufgrund des Kerr-Effektes unterschiedliche optische Weglängen im Laser haben. Dies geschieht auf einer relativ langen Zeitskala (Größenordnung 100 ms), ist also mit einer normalen Messung (nur 4 ms) nicht aufzunehmen. Dazu müsste in den *FastFrame*-Mode gewechselt werden, mit dem jedoch nicht jeder Puls aufgenommen werden kann. Außerdem ist bei solch großen Pulsabständen das undispergierte Signal das aussagekräftigere. Die Genauigkeit liegt dort aber nur bei ca. 40 ps. Durch

Mittelung über mehrere Umläufe kann dies erhöht werden. Dabei verschwinden jedoch schnelle Dynamiken.

Interessant zu beobachten wäre nun, wie beide Pulse ihre Relativbewegung beenden. Gleichen sich beide Pulse nur in ihrer Intensität an, dass sie beide genau dann gleich stark sind, wenn sie den perfekten Abstand zueinander haben? Oder ist eine abklingende Schwingung um diesen zu beobachten? Ist dieser Abstand stabil oder gibt es auch später noch Oszillationen?

Um all diese Fragen zu beantworten, könnte man den Strahl aufspalten und den einen Teil so verzögern, dass der erste Puls in diesem Arm zeitgleich mit dem zweiten Puls im kürzeren Abschnitt überlappt. Dann ist die Abstandsinformation auch wieder im Spektrum kodiert und der Abstand zwischen beiden Pulsen kann genau gemessen werden.

## 5.2. Ursprung der Doppelpulse

In Abschnitt 4.5 wurden die beiden Prozesse vorgestellt, die zur Bildung eines Pulspaars führen: Aufspalten eines Pulses sowie das getrennte Starten eines zweiten Pulses. Welche Parameter legen nun aber den vorherrschenden Prozess fest? In den Messungen konnte das Aufspalten nur selten beobachtet werden, bei bestimmten Justagen schien es unmöglich. Dies deutet darauf hin, dass die Selbstamplitudenmodulation gering ist und der Puls in seiner Entstehungsphase nur langsam kürzer und intensiver wird. Das Ziel weiterer Messungen muss es also sein, diese Selbstamplitudenmodulation auch experimentell kontrollieren zu können. Es wird vermutet, dass dieser Parameter auch die beobachteten Dynamiken der Solitonen-Moleküle beeinflusst, sodass weitere Zustände enthüllt werden könnten.

Es konnte beobachtet werden, dass im Entstehungsprozess von Femtosekundenpulsen auch die Begegnung der Fluktuationen bzw. Pulse im Kristall eine große Rolle spielt. So könnte ein bereits modengekoppelter Puls eine Pikosekunden-Fluktuation beim Anwachsen unterstützen, statt sich selbst aufzuspalten (vgl. Abb. 4.15). Möglicherweise geschieht dieser Vorgang über mehrere Kristallbegegnungen hinweg, so dass die Bedingungen direkt vor dem schon modengekoppelten Puls am besten sind: Der Femtosekundenpuls gibt Energie an eine Fluktuation ab, welche wiederum mit einer anderen im Kristall kollidiert und diese verstärkt, usw.

Die genaue Analyse von verschiedenen Entstehungsprozessen rückt somit in den Fokus weiterer Untersuchungen.



## A. Femtolasers Rainbow CEP HP

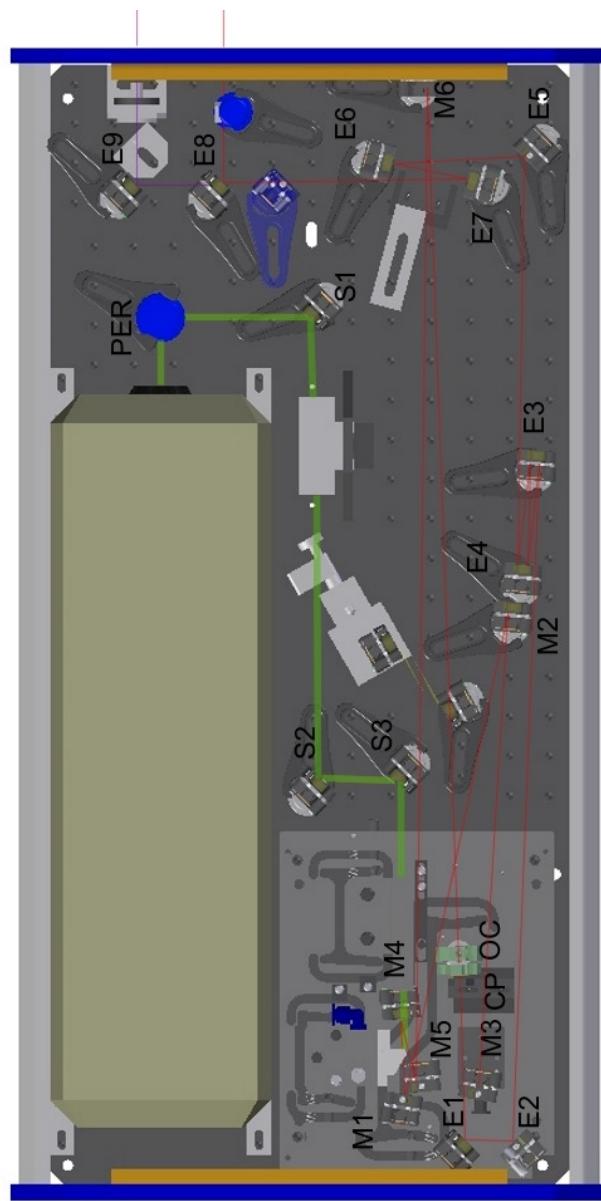


Abb. A.1.: CAD-Zeichnung des Oszillators aus Femtolasers, *Femtosource Rainbow HP CEP - Users Manual v1.1.*



# Literaturverzeichnis

- [Agrawal, 2001] Agrawal, G. P. (2001). *Nonlinear fiber optics*. Academic Press, San Diego, 3rd edition.
- [Ankiewicz und Akhmediev, 2008] Ankiewicz, A. und Akhmediev, N., Hrsg. (2008). *Dissipative Solitons: From Optics to Biology and Medicine*, volume 751 of *Lecture Notes in Physics*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- [Goda und Jalali, 2013] Goda, K. und Jalali, B. (2013). Dispersive Fourier transformation for fast continuous single-shot measurements. *Nature Photonics*, 7(2):102–112.
- [Grapinet und Grelu, 2006] Grapinet, M. und Grelu, P. (2006). Vibrating soliton pairs in a mode-locked laser cavity. *Optics letters*, 31(14):2115–2117.
- [Grelu und Akhmediev, 2004] Grelu, P. und Akhmediev, N. (2004). Group interactions of dissipative solitons in a laser cavity: the case of 2+1. *Optics express*, 12(14):3184–3189.
- [Grelu und Akhmediev, 2012] Grelu, P. und Akhmediev, N. (2012). Dissipative solitons for mode-locked lasers. *Nature Photonics*, 6(2):84–92.
- [Haus, 2000] Haus, H. A. (2000). Mode-locking of lasers. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 6(6):1173–1185.
- [Herink et al., 2016] Herink, G., Jalali, B., Ropers, C., und Solli, D. R. (2016). Resolving the build-up of femtosecond mode-locking with single-shot spectroscopy at 90 MHz frame rate. *Nature Photonics*, 10(5):321–326.
- [Jasapara et al., 2000] Jasapara, J., Rudolph, W., Kalashnikov, V. L., Krimer, D. O., Poloyko, I. G., und Lenzner, M. (2000). Automodulations in Kerr-lens mode-locked solid-state lasers. *JOSA B*, 17(2):319–326.

## Literaturverzeichnis

- [Kalashnikov et al., 2003] Kalashnikov, V., Sorokin, E., und Sorokina, I. (2003). Multipulse operation and limits of the Kerr-lens mode-locking stability. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 39(2):323–336.
- [Kitano und Kinoshita, 1998] Kitano, H. und Kinoshita, S. (1998). Stable multipulse generation from a self-mode-locked Ti:sapphire laser. *Optics Communications*, 157(1–6):128–134.
- [Lai et al., 1997] Lai, M., Nicholson, J., und Rudolph, W. (1997). Multiple pulse operation of a femtosecond Ti:sapphire laser. *Optics Communications*, 142(1–3):45–49.
- [Lauterborn und Kurz, 2003] Lauterborn, W. und Kurz, T. (2003). *Coherent optics: fundamentals and applications ; with 73 problems and complete solutions*. Advanced texts in physics. Springer, Berlin [u.a.], 2 edition.
- [Stingl et al., 1995] Stingl, A., Szipöcs, R., Lenzner, M., Spielmann, C., und Krausz, F. (1995). Sub-10-fs mirror-dispersion-controlled Ti: sapphire laser. *Optics letters*, 20(6):602–604.
- [Wang et al., 1997] Wang, C.-y., Zhang, W., Lee, K. F., und Yoo, K. M. (1997). Pulse splitting in a self-mode-locked Ti:sapphire laser. *Optics Communications*, 137(1):89–92.
- [Xing et al., 1995] Xing, Q., Zhang, W., und Yoo, K. M. (1995). Self-Q switched self-mode-locked Ti: sapphire laser. *Optics communications*, 119(1):113–116.
- [Zavyalov et al., 2012] Zavyalov, A., Grelu, P., und Lederer, F. (2012). Impact of slow gain dynamics on soliton molecules in mode-locked fiber lasers. *Optics letters*, 37(2):175–177.
- [Zavyalov et al., 2009a] Zavyalov, A., Iliew, R., Egorov, O., und Lederer, F. (2009a). Discrete family of dissipative soliton pairs in mode-locked fiber lasers. *Physical Review A*, 79(5).
- [Zavyalov et al., 2009b] Zavyalov, A., Iliew, R., Egorov, O., und Lederer, F. (2009b). Dissipative soliton molecules with independently evolving or flipping phases in mode-locked fiber lasers. *Physical Review A*, 80(4).

# Danksagung

Ganz besonders bedanke ich mich bei Prof. Dr. Claus Ropers, der diese Arbeit ermöglicht hat. Er hatte immer ein offenes Ohr für meine Probleme und die Gespräche mit ihm waren sehr konstruktiv.

Bei Dr. Georg Herink möchte ich mich für die gute Betreuung und Zusammenarbeit bedanken. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Außerdem bleibt mir der gemeinsame Besuch des Labors von Hauke Bensch (Institut für Quantenoptik, Universität Hannover) in guter Erinnerung.

Dr. Murat Sivis und Benjamin Schröder halfen mir bei der korrekten Justage des Resonators. Bei der gesamten Arbeitsgruppe möchte ich mich für das freundliche, kollegiale Arbeitsklima bedanken.

Ein besonderes Dankeschön geht an Herrn Dr. Christoph Bollig von *Abacus Laser* für seine schnelle, technische Unterstützung.

Außerdem bedanke ich mich bei den Mitarbeitern der Elektronik-Werkstatt sowie Andreas Juretzko von der feinmechanischen Werkstatt des 4.Physikalischen Instituts für ihre kompetente und schnelle Unterstützung.



**Erklärung** nach §13(8) der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Physik und den Master-Studiengang Physik an der Universität Göttingen:

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Abschlussarbeit selbstständig verfasst habe, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe und alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Schriften entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht habe.

Darüberhinaus erkläre ich, dass diese Abschlussarbeit nicht, auch nicht auszugsweise, im Rahmen einer nichtbestandenen Prüfung an dieser oder einer anderen Hochschule eingereicht wurde.

Göttingen, den 29. August 2016

(Felix Kurtz)